
















GB	Instructions for use	NL	Gebruiksaanwijzing	DE	Gebrauchsanweisung
AR	تعليمات الاستخدام	BA	Uputstvo za upotrebu	CZ	Návod k použití
DK	Brugsanvisning	ES	Instrucciones de uso	FI	Käyttöohje
FR	Mode d'emploi	GR	Οδηγίες χρήσης	HR	Upute za uporabu
ID	Petunjuk Penggunaan	LT	Naudojimo instrukcijos	LV	Lietošanas instrukcija
NO	Bruksanvisning	PL	Instrukcja użycia	PT	Instruções de uso
RO	Instructiuni de folosire	SE	Bruksanvisning	SI	Navodila za uporabo
SK	Inštrukcie na používanie	UA	Інструкція із застосування		

REF

U1NB10F	U1NB25F	U1NB32F	U1NB38F
U1PB10F	U1NB10F-HC	U1NC10F	U1FB10F
U1NB10F-5	U1FB10F-5	U1PB10F-5	U1FZ10F
U1FZ10F-5	U1NZ10F	U1NZ10F-5	U1NZ25F
U1NZ25F-5	U1NZ32F	U1NZ32F-5	U1NZ38F
U1NZ38F-5	U1PZ10F	U1PZ10F-5	

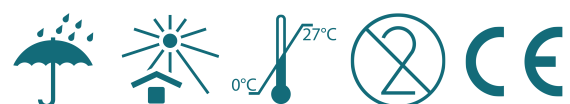

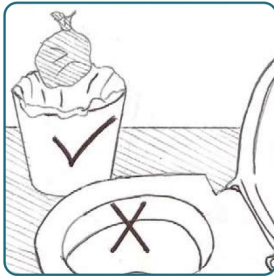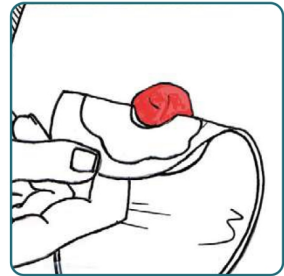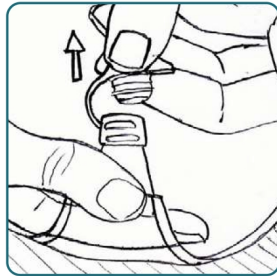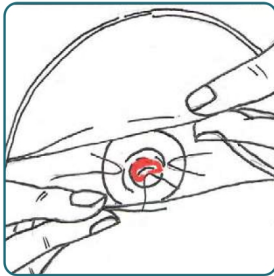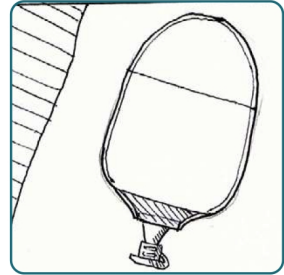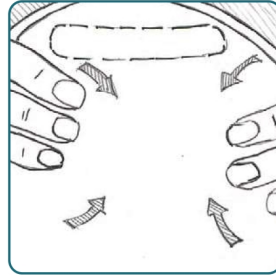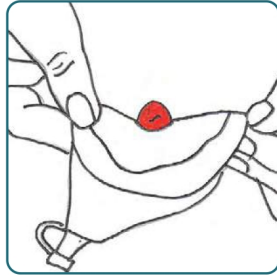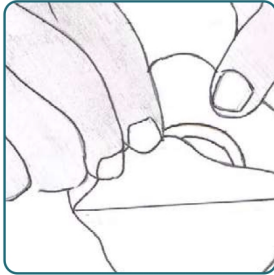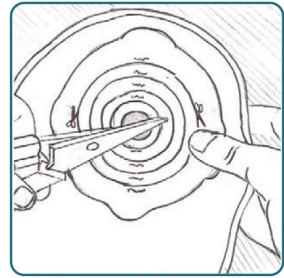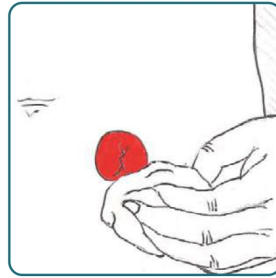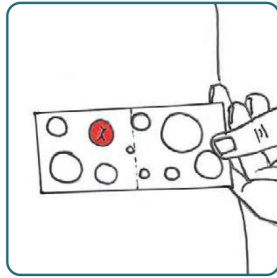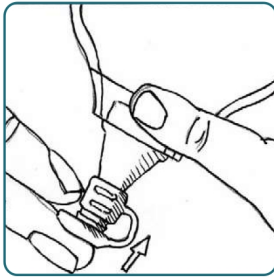

GB - Instructions for use

Intended Use, Product Description and Material Information

Ostomy pouches are used to collect waste from the body and are usually attached to the skin over a surgically made stoma.

Zensiv Ostomy products are a range of 1-piece and 2-piece ostomy pouches and 2-piece flanges in various sizes and shapes. All 1-piece pouches and 2-piece flanges feature a skin friendly hydrocolloid wafer for adhesion to the body and this is protected before use with a release film that shows a cutting guide. The product pouch is manufactured from odour barrier film with a comfort non-woven layer and a carbon filter for odour control (for ileostomy and colostomy). Ileostomy pouches have either a roll up drain port secured with an integral 'velcro' type closure or there are clamps and soft ties supplied in each box. For urostomy the pouches carry a soft polymer tap for easy drainage. All pouches have a viewing window to inspect the stoma if needed. Some ranges feature a vent with lid for venting the pouch if required.

All ZenSiv Ostomy products are latex-free and do not contain ingredients of animal origin. The products are non-sterile and can be used in any appropriate circumstances where the attending physician or healthcare professional decides a non-sterile product may be applied.

Warnings-Precautions



- Each pouch is for single use only. Do not re-use. Re-use can lead to cross-contamination.
- Use only as directed by your healthcare professional.
- Read the instructions prior to use.
- Discontinue use and contact your healthcare professional if you experience any allergic reactions or problems when using the pouches.

Contra-indications

These devices should not be used by anyone with a known sensitivity to: polyethylene, polyamide, medical charcoal, synthetic polymer, ethylene vinyl acetate, polypropylene, polyester, polyisobutylene, carboxymethylcellulose, pectin or glycerine.

Storage Conditions

It is best to store your products in a cool dry place with a guidance of temperature from 0°C to 27°C as is noted on the product label.

Serious Incidents

Should a serious incident arise as a result of using the product please report this immediately to the manufacturer and the Competent Authority in the country where you reside.

Shelf Life

Use by the expiry date noted on the label.

Collect your materials

Make sure that all necessary materials are ready for use. Collect a measuring guide, a pair of scissors, a pen, wet and dry gauze and a stoma pouch.

Choose the right size

Measure your stoma with a measuring guide and cut (if necessary) the flange to the right size of the stoma. Make sure that you choose the right size so that the stoma and surrounding skin will stay healthy. Allow a maximum of 2 mm of space between your stoma and flange for a safe and correct fit. If the size is too big, your faeces will damage the skin. If the size is too small, the flange will damage the stoma. Over time your stoma may change shape or size, so periodically measurements may be required again to prevent any leakage.

Prepare your skin

Support the skin and remove the flange carefully, do not tear off but push the skin back from the flange, use a wet gauze if necessary. Wash the skin surrounding your stoma with warm and unperfumed water. Do not use anything that contains alcohol, perfume or ether to clean your skin as it can cause damage. Do not rub the skin too hard as this might lead to skin damage. Dry the skin carefully and thoroughly to ensure that your pouch adheres well.

Optional: If your skin is irritated and sore you can use skin barrier cream, hydrocolloid powder or skin barrier wipes. Apply the powder, skin barrier cream or wipe gently to the surrounding skin.

Close the tap at the base of the pouch

First make sure that the tap is closed safely. Close the tap by pressing the tap firmly.

Connecting your pouch to a night bag.

The pouch has a universal tap. This tap can be connected to almost any type and brand of night bag. Open the tap of the pouch and connect this to the connector of the night bag and ensure that the connection is secure.

Fit your pouch

Remove the release paper of the flange. Fold the flange halfway and place the opening at the underside of the stoma. Stretch the skin of your abdomen with a flat hand and pull the whole flange over the stoma into the right position. Work your way around the stoma so that the hydrocolloid will attach to the skin and make sure that the flange is secure. Place your hand over the flange and make sure that a good seal is created.

Empty your pouch

Lift up the tap and open the tap. Empty the contents of your pouch into the toilet. Close tap again making sure it is securely closed.

Viewing window

The ostomy pouch includes a viewing window which makes it possible to inspect the stoma as well as the output from the stoma. It is also very helpful when applying the pouch to make sure it is located correctly over the stoma. Lift up the non-woven of the viewing window for inspection.

Disposal of your pouch

Remove your pouch and dispose of it in the trash. Do not flush your used pouch down the toilet because this will block your sewage system.

Frequency of pouch change

Change/empty your pouch as advised by your healthcare professional.

Beoogd gebruik, productbeschrijving en materiaal informatie

Stomamaterialen worden gebruikt om afvalstoffen uit het lichaam op te vangen en worden meestal aan de huid bevestigd rondom een chirurgisch gemaakte stoma.

Zensiv producten zijn een reeks van 1-delige en 2-delige stomamaterialen en 2-delige huidplaten in verschillende maten en vormen. Alle 1-delige zakjes en 2-delige huidplaten hebben een huidvriendelijke hydrocolloïde huidplaat voor hechting aan het lichaam. De hydrocolloïde huidplaat is voorzien van een beschermfolie met maataanduiding voor het uitknippen op de juiste maat. Het stomazakje is vervaardigd van een folie met geurbarrière met een comfortabele non-woven laag en een koolstoffilter voor geurneutralisatie (voor ileostomie en colostomie). Ileostomiezakjes hebben ofwel een oprolbare sluiting met een geïntegreerde klittenband sluiting of er zijn klemmen en zachte metalen strips meegeleverd in elke doos. De urostomiezakjes zijn uitgerust met een zacht kunststof kraantje voor eenvoudige leging van het zakje. Alle zakjes hebben een kijkvenster om indien nodig de stoma te kunnen inspecteren. Sommige producten zijn voorzien van een ventiel voor het eventueel ontlichten van het zakje.

Alle ZenSiv producten zijn latexvrij en bevatten geen ingrediënten van dierlijke oorsprong. De producten zijn niet-steriel en kunnen worden gebruikt in alle geschikte omstandigheden waarin de behandelend arts of zorgverlener besluit dat een niet-steriel product mag worden toegepast.

Waarschuwingen-voorzorgsmaatregelen



- Elk product is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken. Hergebruik kan leiden tot kruisbesmetting.
- Gebruik alleen zoals voorgeschreven door uw zorgverlener.
- Lees vóór gebruik de instructies.
- Stop het gebruik en neem contact op met uw arts als u allergische reacties of problemen ervaart tijdens het gebruik van het product.

Contra-indicaties

Deze producten mogen niet worden gebruikt door iemand met een bekende gevoeligheid voor: polyethyleen, polyamide, medische houtskool, synthetisch polymeer, ethyleenvinylacetaat, polypropyleen, polyester, polyisobutyleen, carboxymethylcellulose, pectine of glycerine.

Opslagcondities

Producten bewaren op een koele, droge plaats en bij een temperatuur van 0°C tot 27°C, zoals vermeld op het productetiket.

Ernstige incidenten

Mocht er zich een ernstig incident voordoen als gevolg van het gebruik van het product, meldt dit dan onmiddellijk aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in het land waar u woont.

Houdbaarheid

Te gebruiken tot de vervaldatum vermeld op het etiket.

Verzamel je materialen

Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaar zijn voor gebruik: een maatkaart (mal), een schaar, een pen, nat en droog gaas en een stomazakje.

Kies de juiste maat

Meet uw stoma met een maatkaart en/of mal en knip (indien nodig) de huidplaat op de juiste maat van de stoma. Zorg ervoor dat u de juiste maat kiest, zodat de stoma en de omliggende huid gezond blijven. Laat maximaal 2 mm ruimte tussen uw stoma en de huidplaat voor een veilige en correcte pasvorm. Als de maat te groot is, beschadigt de ontlasting de huid. Als de maat te klein is, zal de huidplaat de stoma beschadigen. Na verloop van tijd kan uw stoma van vorm of grootte veranderen, dus periodieke metingen kunnen opnieuw nodig zijn om lekkage te voorkomen.

Vorbereiding van de huid

Ondersteun de huid en verwijder de huidplaat voorzichtig, ruk niet af maar duw de huid terug van de huidplaat, gebruik indien nodig een nat gaasje. Was de huid rondom uw stoma met warm en ongeparfumeerd water. Gebruik niets dat alcohol, parfum of ether bevat om uw huid te reinigen, omdat dit schade kan veroorzaken. Wrijf niet te hard over de huid, dit kan leiden tot huidbeschadiging. Droog de huid zorgvuldig en grondig om ervoor te zorgen dat de huidplaat goed hecht.

Optioneel: als uw huid geïrriteerd en pijnlijk is, kunt u huidbeschermingscrème, hydrocolloïde poeder of huidbeschermingsdoekjes gebruiken. Breng de poeder, de huidbeschermende crème of de huidbeschermingsfilm aan op de omliggende huid.

Sluit het kraantje aan de onderkant van het zakje

Zorg eerst dat het kraantje veilig is gesloten. Sluit het kraantje door het dopje stevig op het kraantje te drukken.

Het zakje aansluiten op een nachtzak

Het zakje heeft een universeel kraantje. Dit kraantje kan op bijna elk type en merk urine nachtzak worden aangesloten. Open de kraan van het zakje en sluit deze aan op de connector van de nachtzak en zorg ervoor dat de verbinding veilig is.

Aanbrengen van het zakje

Verwijder de beschermfolie van de huidplaat. Vouw de huidplaat halverwege en plaats de opening aan de onderkant van de stoma. Strek de huid van de buik met een platte hand en plaats de huidplaat over de stoma in de juiste positie. Druk de hydrocolloïde huidplaat goed aan rondom de stoma, zodat deze goed hecht en zorg er voor dat de huidplaat goed vastzit. Plaats uw hand over de huidplaat en zorg ervoor dat een goede hechting ontstaat.

Legen van het zakje

Til de kraan op en open de kraan. Leeg de inhoud van het zakje in het toilet. Sluit de kraan opnieuw en zorg ervoor dat deze goed gesloten is.

Kijkvenster

Het stomazakje heeft een kijkvenster dat het mogelijk maakt om zowel de stoma als de output van de stoma te inspecteren. Het is ook erg handig bij het aanbrengen van het zakje om te controleren of de huidplaat goed geplaatst is rondom de stoma. Til het non-woven van het kijkvenster omhoog voor inspectie.

Verwijderen van het zakje

Verwijder uw zak en gooi deze in de prullenbak. Spoel het gebruikte zak niet door het toilet, omdat de riolering hierdoor verstopt kan raken.

Vervangen van het zakje

Vervang en/of leeg het zakje zoals geadviseerd door uw zorgverlener.

Verwendungszweck, Produktbeschreibung und Materialangaben

Stomabeutel werden zur Sammlung von Körperausscheidungen verwendet und werden gewöhnlich über einem chirurgisch angelegten Stoma auf der Haut angebracht.

Zensiv Stomaprodukte sind eine Reihe von 1- und 2-teiligen Stomabeuteln und 2-teiligen Flanschen in verschiedenen Größen und Formen. Alle 1-Beutel und 2-teiligen Flanschen sind mit einer hautfreundlichen Hydrokolloid-Platte zur Haftung auf dem Körper ausgestattet, die vor der Anwendung mit einem Trennfilm mit Schneidföhrung geschützt ist. Der Produktbeutel wird aus einer geruchsneutralisierenden Folie mit einer Vliesschicht und einem Aktivkohlefilter zur Geruchskontrolle (für Ileostomie und Kolostomie) hergestellt. Ileostoma-Beutel haben entweder einen auflösbaren Auslass, der mit einem integrierten Klettverschluss verschlossen wird, oder es befinden sich in jeder Schachtel Klemmen und weiche Bänder. Für Urostoma sind die Beutel mit einem weichen Polymer-Hahn zur einfachen Drainage ausgestattet. Alle Beutel sind mit einem Sichtfenster ausgestattet, um das Stoma gegebenenfalls zu inspizieren. Bestimmte Reihen haben eine Entlüftung, um den Beutel gegebenenfalls zu entlüften.

Alle ZenSiv Stomaprodukte sind latexfrei und enthalten keine Inhaltsstoffe tierischer Herkunft. Die Produkte sind nicht steril und können unter allen gegebenen Umständen genutzt werden, wenn der behandelnde Arzt oder die medizinische Fachkraft entscheidet, dass ein nicht-steriles Produkt angewendet werden kann.

Warnungen-Vorsorgemaßnahmen



- Jeder Beutel dient nur der einmaligen Anwendung. Nicht wiederverwenden. Wiederverwendung kann Kreuzkontamination verursachen.
- Nur nach Anweisung Ihrer medizinischen Fachkraft anwenden.
- Vor der Anwendung die Anleitung lesen.
- Stellen Sie die Nutzung der Beutel ein und wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachkraft, wenn die Anwendung Beutel allergische Reaktionen auslöst oder sonstige Probleme verursacht.

Kontraindikationen

Diese Produkte sollten nicht von Personen mit einer bekannten Empfindlichkeit vor folgenden Stoffen verwendet werden: Polyethylen, Polyamid, Medizinalkohle, synthetische Polymere, Ethylen-Vinylacetat, Polypropylen, Polyester, Polyisobuten, Carboxymethylcellulose, Pektin oder Glycerin.

Lagerungsbedingungen

Das Produkt sollte an einem kühlen, trockenen Ort, bei einer Temperatur zwischen 0°C bis 27°C gelagert werden, wie es auch auf dem Produktetikett verzeichnet ist.

Schwerer Zwischenfall

Falls sich in Folge der Anwendung dieses Produktes ein schwerer Zwischenfall ereignen, bitte sofort den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Heimatland informieren.

Haltbarkeit

Bis zum auf dem Etikett angezeigten Verfallsdatum verwenden.

Sammeln Sie Ihre Materialien

Sorgen Sie dafür, dass alle benötigten Materialien gebrauchsfertig sind. Legen Sie ein Lineal oder Maßband, eine Schere, einen Stift, eine befeuchtete und eine trockene Mullbinde und einen Stomabeutel zurecht.

Wählen Sie die richtige Größe

Messen Sie Ihr Stoma mit einem Lineal oder Maßband und schneiden Sie (falls erforderlich) den Flansch je nach Größe des Stomas zu. Achten Sie darauf, die richtige Größe zu wählen, damit das Stoma und die das Stoma umgebende Haut gesund bleiben. Lassen Sie maximal 2 mm Zwischenraum zwischen Ihrem Stoma und dem Flansch, damit es sicher und genau passt. Wenn der Flansch zu groß ist, kann Ihr Kot die Haut beschädigen. Wenn er zu klein ist, kann der Flansch die Haut beschädigen. Im Laufe der Zeit kann sich die Form oder Größe des Stomas verändern, daher können regelmäßige neue Messungen erforderlich sein, um Leckagen zu vermeiden.

Bereiten Sie Ihre Haut vor

Stützen Sie die Haut und entfernen Sie den Flansch vorsichtig, nicht abreißen, sondern die Haut vom Flansch wegdrücken, gegebenenfalls eine befeuchtete Mullbinde verwenden. Die Haut um Ihr Stoma mit warmem und nicht parfümiertem Wasser waschen. Zur Reinigung Ihrer Haut keine Mittel verwenden, die Alkohol, Parfüm oder Ether enthalten, da diese die Haut beschädigen können. Reiben Sie die Haut nicht zu fest, das kann die Haut beschädigen. Trocknen Sie die Haut vorsichtig und gründlich, damit Ihr Beutel gut haftet.

Optional: Wenn Ihre Haut gereizt und strapaziert ist, können Sie Skin Barrier Creme, Hydrokolloid-Pulver oder Skin Barrier Wipes verwenden. Das Pulver, die Skin Barrier Creme oder die Wipes sanft auf die das Stoma umgebende Haut auftragen.

Den Hahn an der Unterseite des Beutels schließen

Prüfen Sie zuerst, ob der Hahn sicher geschlossen ist. Den Hahn durch festes Drücken schließen.

Ihren Beutel an einen Nachtbeutel verbinden

Der Beutel hat einen Universalhahn. Dieser Hahn kann an nahezu jede Art und Marke Nachtbeutel angeschlossen werden. Den Hahn des Beutels öffnen und diesen mit dem Anschluss des Nachtbeutels verbinden. Prüfen, ob der Anschluss sicher ist.

Ihren Beutel anbringen

Das Trennpapier des Flansches abnehmen. Den Flansch zur Hälfte falten und die Öffnung an die untere Seite des Stomas legen. Die Haut des Bauches mit flacher Hand straffen und den kompletten Flansch in die korrekte Position über dem Stoma ziehen. Arbeiten Sie dabei um das Stoma herum, damit das Hydrokolloid auf der Haut haftet und vergewissern Sie sich, dass der Flansch gut befestigt ist. Legen Sie Ihre Hand über den Flansch und sorgen Sie dafür, dass eine einwandfreie Versiegelung erzielt wurde.

Ihren Beutel entleeren

Den Hahn anheben und öffnen. Den Inhalt Ihres Beutels in die Toilette entleeren. Den Hahn wieder schließen und sicherstellen, dass er sicher verschlossen ist.

Sichtfenster

Im Stomabeutel befindet sich ein Sichtfenster, das die Möglichkeit bietet, das Stoma und dessen Ausscheidungen zu inspizieren. Das Sichtfenster ist auch beim Anlegen des Beutels sehr hilfreich, da man sich so vergewissern kann, dass er korrekt über dem Stoma positioniert wird. Heben Sie zur Inspektion das Vlies des Sichtfensters an.

Entsorgung Ihres Beutels

Entfernen Sie Ihren Beutel und entsorgen Sie ihn im Müll. Spülen Sie Ihren gebrauchten Beutel nicht durch die Toilette, da es sonst zur Verstopfung der Kanalisation kommt.

Häufigkeit des Beutelwechsels

Wechseln bzw. entleeren Sie Ihren Beutel gemäß den Empfehlungen Ihrer medizinischen Fachkraft.

تعليمات الاستخدام - AR

الاستخدام المقصود وصف المنتج ومعلومات المواد

تُستخدم أكياس الاستوما لجمع الفضلات من الجسم وعادة ما يتم ربطها بالجلد فوق فتحة الفغر ستوما المصنوعة جراحياً.

منتجات الاستوما زينسيف هي عبارة عن مجموعة من أكياس فغر ستوما قطعة واحدة وقطعتين وحلقه من قطعتين بأحجام وأشكال مختلفة. تحتوي جميع الأكياس ذات القطعة الواحدة والقطعتين على رقاقة مائية غروانية صديقة للبشرة للالتصاق بالجسم وهذا محمي قبل الاستخدام مع فيلم إطلاق يظهر دليل القطع. يتم تصنيع كيس المنتج من فيلم حاجز الرائحة مع طبقة مريحة غير منسوجة وفلتر كربون للتحكم في الرائحة (لفغر اللانفسي البوستومي وفغر القولون كولوستومي). تحتوي أكياس فغر اللانفسي البوستومي إما على منفذ تصريف متدحرج مؤمن بإغلاق متكامل من نوع "الفيلكرو" أو توجد مشابك وروابط لينة في كل صندوق. بالنسبة إلى فغر البول ، تحمل الأكياس حنفية بوليمر ناعمة لسهولة التصريف. تحتوي جميع الأكياس على نافذة عرض لفحص الثغرة إذا لزم الأمر. تحتوي بعض النطاقات على فتحة تهوية مع غطاء لتنفيس الحقيبة إذا لزم الأمر.

جميع منتجات زينسيف للمفاغره خالية من اللاتكس ولا تحتوي على مكونات من أصل حيواني. المنتجات غير معقمة ويمكن استخدامها في أي ظروف مناسبة يقرر فيها الطبيب المعالج أو أخصائي الرعاية الصحية منتجًا غير معقم.

تحذيرات - احتياطات

- كل كيس للاستخدام الفردي فقط - لا تعد الاستخدام - يمكن أن تؤدي إعادة الاستخدام إلى التلوث المتبادل.
- استخدم فقط حسب توجيهات أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.
- اقرأ التعليمات قبل الاستخدام.
- توقف عن الاستخدام واتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا واجهت أي ردود فعل أو حساسية عند استخدام الأكياس.



موانع الاستخدام

لا ينبغي استخدام هذه الأجهزة من قبل أي شخص لديه حساسية معروفة تجاه: البولي إيثيلين أو البولي أميد أو الفحم الطبي أو البوليمر الصناعي أو أسيتات فينيل الإيثيلين أو البولي بروبيلين أو البوليستر أو بولي أيزوبوتيلين أو كاربوكسي ميثيل سلولوز أو البكتين أو الجلسرين.

شروط التخزين

من الأفضل تخزين منتجاتك في مكان بارد وجاف مع توجيه درجة الحرارة من 0 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية كما هو موضح على ملصق المنتج.

حوادث خطيرة

في حالة وقوع حادث خطير نتيجة لاستخدام المنتج ، يرجى إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في البلد الذي تقيم فيه على الفور.

مدة الصلاحية

الاستخدام بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الملصق.

اجمع موادك

تأكد من أن جميع المواد الضرورية جاهزة لجمع دليل القياس ، ومقص ، وقلم ، وشاش رطب وجاف وكيس الفغر (ستوما) كل القطعتين.

اتر المقاس المناسب

قم بقياس فتحة الفغر ستوما باستخدام دليل قياس وقص (إذا لزم الأمر) الحافة إلى الحجم الصحيح للفتحة. تأكد من اختيار الحجم المناسب بحيث تبقى الفتحة والجلد المحيط بصحة جيدة. اترك مسافة لا تقل عن 2 مم بين الفتحة وحافة القاعدة من أجل ملائمة آمنة وصحيحة. إذا كان الحجم كبيراً جداً ، فإن برازك سيتلف الجلد. إذا كان الحجم صغيراً جداً ، فسوف تتلف حافة القاعدة فتحة الفغر ستوما- بمرور الوقت قد يتغير شكل الفتحة أو حجمها ، لذا قد يلزم إجراء قياسات دورية مرة أخرى لمنع أي تسرب.

تجهيز جلدك

دعم الجلد وإزالة القاعدة بعناية ، لا تنزعها ولكن ادفع الجلد للخلف من الحافة ، استخدم الشاش الرطب إذا لزم الأمر. اغسل الجلد المحيط بفتحة الفغر ستوما بالماء الدافئ وغير المعطر. لا تستخدم أي شيء يحتوي على الكحول أو العطور أو الأثير لتنظيف بشرتك لأنها يمكن أن تسبب الضرر. لا تفرك الجلد بشدة لأن هذا قد يؤدي إلى تلف الجلد. جفف الجلد بعناية ودقة للتأكد من أن الكيس يلتصق بشكل جيد.

اختياري: إذا كان جلدك متهيجاً ومتقرحاً ، يمكنك استخدام كريم حماية البشرة أو مسحوق هيدروكولويد أو مناديل حماية الجلد. ضع المسحوق أو كريم حماية البشرة أو امسح برفق على الجلد المحيط.

أغلق الصنبور اسفل الكيس

أولاً ، تأكد من إغلاق الصنبور بأمان. أغلق الصنبور بالضغط عليه بقوة.

توصيل كيس الفغر بكيس بول ليلي

الحقيبة لديها صنبور عالمي. يمكن توصيل هذا الصنبور بأي نوع وعلامة تجارية لحقيبة ليلية تقريباً. افتح صنبور الحقيبة وقم بتوصيل هذا بموصل الحقيبة الليلية وتأكد من أن الاتصال آمن.

تناسب الكيس

قم بإزالة ورقة تحرير القاعدة. اطو القاعدة في المنتصف وضع الفتحة في الجانب السفلي من فتحة الفغر ستوما. شد جلد بطنك بيد مسطحة ثم اسحب القاعدة بالكامل فوق فتحة الفغر ستوما إلى الوضع الصحيح. شق طريقك حول الفغر ستوما بحيث تلتصق القاعدة بالجلد وتأكد من أن القاعدة آمنة. ضع يدك على القاعدة وتأكد من لصقها جيداً.

تفريغ الكيس

ارفع الصنبور ثم افتحه و أفرغ محتويات الكيس في المراض. أغلق الصنبور مرة أخرى مع التأكد من إغلاقه بشكل آمن.

شباك الملاحظة

يحتوي كيس الفغر ستوما على نافذة مشاهدة تجعل من الممكن فحص فتحة الفغر ستوما وكذلك الإخراج من الفتحة. كما أنه مفيد جداً عند تطبيق الكيس للتأكد من وضعها بشكل صحيح فوق الفتحة ارفع الطبقة غير المنسوجة من نافذة العرض للمشاهدة.

التخلص من الكيس

قم بإزالة الكيس والتخلص منه في سلة المهملات. لا تفرغ الكيس المستخدم في المراض لأن ذلك سيعيق نظام الصرف الصحي.

تكرار تغيير الكيس

قم بتغيير / إفراغ الكيس كما ينصح به أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

BA - Uputstvo za upotrebu

Namjena, opis proizvoda i informacije o materijalima

Stoma vrećice se koriste za prikupljanje tjelesnih izlučevina i obično se pričvršćuju na kožu nakon hirurškog zahvata stome.

ZenSiv Stoma proizvodi su podijeljeni na jednodijelne i dvodijelne stoma sisteme vrećica sa podlogama različitih oblika i veličina. Svi jednodijelni i dvodijelni sistemi vrećica iz ZenSiv programa su za kožu ugodni i izrađeni su od hidrokoloidnih materijala koji se pričvršćuju za kožu. Folija koja se nalazi na hidrokoloidnim podlogama čini zaštitni sloj koji se skida prije samog pričvršćivanja na kožu, što se detaljno može vidjeti na vodiču za rezanje.

Vrećica za stomu izrađena je od folije za zaštitu od mirisa sa udobnim netkanim i karbonskim filterom za kontrolu mirisa. (ileostoma i kolostoma). Vrećice za ileostomu imaju otvor za namotavanje koji se učvršćuje integralnim zatvaračem tipa "čičak" ili se u svakoj kutiji nalaze stezaljke i meke spona. Za urostomu vrećice nose meku polimernu slavinu za drenažu. Sve vrećice imaju prozor za pregled stome u slučaju potrebe. Neki modeli vrećica imaju posebne otvore (vent otvor) s poklopcem za odzračivanje vrećice, ako je potrebno.

Svi ZenSiv Stoma proizvodi ne sadrže lateks i ne sadrže sastojke životinjskog porijekla. Proizvodi su nesterilni i mogu se koristiti u bilo kojim odgovarajućim okolnostima kada dežurni ljekar ili zdravstveni radnik odluče da se može primijeniti nesterilni proizvod.

Upozorenja-Predostrožnosti



- Svaka vrećica iz asortimana ZenSiv stoma programa je jednokratna i ne može se ponovo koristiti. Ponovno korištenje vrećice može izazvati unakrsnu-kontaminaciju.

- Koristiti prema uputama zdravstvenog radnika.

- Pročitati upute prije upotrebe.

- U slučaju bilo kakve alergijske reakcije ili probleme prilikom upotrebe vrećica, prekinuti korištenje i obavijestiti svog zdravstvenog radnika.

Kontraindikacije

ZenSiv proizvode ne smiju koristiti osobe sa osjetljivošću na: polietilen, poliamid, medicinski ugljen, sintetički polimer, etilen vinil acetat, polipropilen, poliestar, polizobutilen, karboksimetilcelulozu, pektin ili glicerol.

Uslovi skladištenja

Proizvodi se čuvaju na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi od 0°C do 27°C, kako je navedeno i na etiketi proizvoda.

Ozbiljni slučajevi

Ako se zbog upotrebe proizvoda dogodi ozbiljan incident, molimo da to odmah prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu u državi u kojoj živite.

Rok trajanja

Rok trajanja naveden na etiketi.

Pripremite svoj materijal za upotrebu

Provjerite jesu li svi potrebni materijali spremni za upotrebu. Pripremite mjerni vodic, škare, olovku, vlažnu i suhu gazu i vrećicu za stomu.

Izaberite pravu veličinu

Izmjerite promjer otvora stome vodicom za mjerenje i izrežite (ako je potrebno) podlogu na pravu veličinu stome. Obavezno odaberite pravu veličinu kako bi stoma i okolna koža ostali zdravi. Omogućite maksimalno 2 mm prostora između stome i podloge za sigurno i pravilno postavljanje. Ako je veličina prevelika, fekalije će oštetiti kožu. Ako je veličina premala, podloga će oštetiti kožu na stomaku. Vremenom vaša stoma može promijeniti oblik ili veličinu, pa će povremeno biti potrebna ponovna mjerenja kako bi se spriječilo curenje.

Pripremite Vašu kožu

Poduprite kožu i pažljivo uklonite podlogu, ne odvajajte, već gurnite kožu natrag sa podloge, po potrebi upotrijebite vlažnu gazu. Operite kožu oko vaše stome toplom i neparfemiranom vodom. Za čišćenje kože nemojte koristiti ništa što sadrži alkohol, parfem jer mogu prouzrokovati oštećenja. Ne trljajte kožu prejako jer bi to moglo dovesti do oštećenja kože. Osušite kožu pažljivo i temeljno kako biste osigurali da vaša vrećica dobro prijanja.

Napomena: Ako vam je koža nadražena i upaljena, možete koristiti kremu za zaštitu, hidrokoloidni puder ili maramice za zaštitu kože. Nanesite puder, kremu za zaštitu kože i nježno obrišite okolnu područje stome.

Zatvorite meku slavinu (otvor) na dnu kese

Prvo provjerite da li je otvor na dnu kese sigurno zatvoren. Zatvorite otvor tako da čvrsto pritisnete poklopac na otvoru.

Spojite vrećicu za noćnu kesu

Vrećica ima univerzalnu slavinu (otvor). Ovom slavinom možete povezati gotovo svaku vrstu i brend noćne kese. Kada otvorite slavinu vrećice i spojite je sa priključkom noćne kese, zadnji korak - provjerite da li je veza sigurna.

Pripremite svoju vrećicu

Uklonite zaštitni papir sa podloge. Preklopite podlogu na pola i postavite otvor na donjoj strani stome. Poravnajte kožu trbuha rukom i povucite cijelu podlogu preko stome u pravilan položaj. Pomičite kožu oko stome tako da se hidrokoloidna podloga pričvrsti za kožu i osigurajte da je dobro zaljepljena za kožu. Postavite ruku preko podloge i provjerite na taj način da li je stvorena jaka veza između podloge i kože.

Ispraznite sadržaj vrećice

Otvorite završetak vrećice i otvorite vrećicu, zatim ispraznite sadržaj vrećice u toalet.

Prozor za pregled

Vrećica za stomu uključuje prozor za gledanje koji omogućava pregled stome, kao i izlaz iz stome. Također je korisno kada aplicirate kesu kako biste bili sigurni da ste pravilno postavili preko stome. Podignite netkani prozor za pregled.

Odlaganje vrećice

Iskorištenu vrećicu bacite u smeće. Iskorištene vrećice ne smijete bacati u toalet, jer to može blokirati vašu kanalizaciju.

Učestalost mijenjanja vrećica

Promijenite / ispraznite vrećicu prema uputama vašeg zdravstvenog radnika.

CZ - Návod k použití

Účel použití, popis produktu a informace o materiálech

Stomické sáčky se používají ke shromažďování odpadu z těla a jsou obvykle přiloženy k pokožce na chirurgicky vytvořené stomii.

Produkty Zensiv Ostomy jsou řadou jednodílných a dvoudílných stomických sáčků a dvoudílných kroužků různých velikostí a tvarů. Všechny jednodílné sáčky a dvoudílné podložky mají hydrokoloidní lepicí vrstvu šetrnou k pokožce, která slouží pro zajištění přilnutí k tělu a která je před použitím chráněna ochrannou fólií s vystřihovací šablonou. Sáček se vyrábí z fólie zabraňující zápachu s komfortní vrstvou z netkané textilie a uhlíkovým filtrem pro odbourávání zápachu (pro ileostomie a kolostomie). Ileostomické sáčky mají buď rolovací výpusť zabezpečenou integrálním uzávěrem typu suchý zip nebo se v každé krabici dodávají svorky a měkké šňůrky. V případě urostomie mají sáčky měkký polymerový uzávěr pro snadné odvádění moči.

Všechny sáčky mají kontrolní okénko, kterým lze v případě potřeby stomii kontrolovat. Některé produktové řady mají ventil s krytkou, kterým se může v případě potřeby sáček odvětrávat.

Žádné produkty ZenSiv Ostomy neobsahují latex ani složky živočišného původu. Produkty jsou nesterilní a lze je použít za jakýchkoliv vhodných okolností, kdy ošetřující lékař nebo zdravotnický pracovník rozhodne o tom, že se může použít nesterilní produkt.

Varování – bezpečnostní opatření

- Každý sáček je pouze na jedno použití. Nepoužívejte opakovaně. Opakované použití může vést ke křížové kontaminaci.
- Používejte pouze podle pokynů zdravotnického pracovníka.
- Před použitím si přečtěte návod k použití.
- Pokud se při používání sáčků vyskytnou alergické reakce nebo problémy, přerušte jejich používání a kontaktujte zdravotnického pracovníka.

Kontraindikace

Tyto pomůcky by neměla používat osoba se známou citlivostí na polyetylen, polyamid, lékařské uhlí, syntetický polymer, ethylenvinylacetát, polypropylen, polyester, polyisobutylem, karboxymethylcelulózu, pektin nebo glycerin.

Podmínky skladování

Produkty skladujte nejlépe v chladu na suchém místě s přibližnou teplotou od 0°C do 27°C, jak je uvedeno na etiketě produktu.

Vážné incidenty

Dojde-li k vážnému incidentu v důsledku používání produktu, neprodleně to oznamte výrobci a příslušnému úřadu v zemi, ve které bydlíte.

Trvanlivost

Použijte do data spotřeby uvedeného na obalu.

Připravte si materiál

Připravte si všechny potřebný materiál - měřicí šablonu, nůžky, tužku, mokrou a suchou gázu a stomický sáček.

Zvolte správnou velikost

Změřte stomii měřicí šablonou a podle potřeby ořízněte podložku na správnou velikost stomie. Ujistěte se, že jste vybrali správnou velikost, aby stomie a okolní pokožka zůstaly zdravé. Mezi stomií a podložkou ponechtejте maximálně 2 mm prostoru pro bezpečné a správné nasazení. Pokud je velikost příliš velká, stolice poškodí pokožku. Pokud je velikost příliš malá, podložka poškodí stomii. Během doby může stomie změnit tvar nebo velikost, takže může být zapotřebí pravidelné měření, aby se zabránilo úniku.

Připravte pokožku

Podepřete pokožku a opatrně sejměte podložku, neodtráhejte ji, ale tlačte pokožku zpět z podložky; v případě potřeby použijte mokrou gázu. Omyjte pokožku okolo stomie teplou a neparfémovanou vodou. K čištění pokožky nepoužívejte nic, co obsahuje alkohol, parfém nebo éter, protože to může způsobit poškození. Nemněte pokožku příliš drsně, protože by to mohlo vést k jejímu poškození. Opatrně a důkladně pokožku vysušte, abyste zajistili dobré přilnutí sáčku.

Volitelné: Pokud je vaše pokožka podrážděná nebo bolestivá, můžete použít ochranný krém, hydrokoloidní prášek nebo ochranné ubrousky. Použijte prášek, ochranný krém nebo ubrousek jemně na okolní pokožku.

Zavřete uzávěr na spodní straně sáčku

Nejprve se ujistěte, že uzávěr je bezpečně zavřený. Uzávěr zavřete tak, že ho pevně stisknete.

Připojení sáčku na noční sběrný sáček

Sáček má univerzální uzávěr. Tento uzávěr lze připojit téměř ke každému typu a značce nočního sběrného sáčku. Otevřete uzávěr sáčku a připojte ho ke konektoru nočního sběrného sáčku. Zkontrolujte, že je připojení bezpečné.

Pripevnění sáčku

Odstraňte ochrannou folii z podložky. Přeložte podložku na polovinu a umístěte otvor na spodní stranu stomie. Plochou dlaní napněte kůži na břiše a natáhněte celou podložku přes stomii do správné polohy. Prsty uhlazujte místo kolem stomie tak, aby hydrokoloid přilnul k pokožce, a ujistěte se, že podložka je zajištěna. Položte ruku na podložku a zkontrolujte, zda je dobře utěsněna.

Vyprazdňování sáčku

Zvedněte uzávěr a otevřete ho. Vyprázdněte obsah sáčku do toalety. Znovu uzávěr zavřete a ujistěte se, že je bezpečně zavřený.

Kontrolní průhledné okénko

Stomický sáček má kontrolní průhledné okénko, které umožňuje kontrolovat stomii i vývod ze stomie. Při použití sáčku je také velmi užitečné ujistit se, že je správně umístěn na stomii. Zvedněte netkanou textilii kontrolního okénka k provedení kontroly.

Likvidace sáčku

Odstraňte sáček a vyhoďte ho do odpadu. Použitý sáček nesplachujte do záchodu, protože by se tím mohla ucpat kanalizace.

Frekvence výměny sáčků

Vyměňujte/vyprazdňujte sáček podle pokynů zdravotnického pracovníka.

DK - Brugsanvisning

Tilsigtet anvendelse, produktbeskrivelse og materialeinformation

Stomiposer bruges til at opsamle affaldsprodukter fra kroppen og er normalt fastgjort til huden over en kirurgisk fremstillet stomi.

Zensiv Ostomy-produkter er en serie med stomiposer i 1 og 2 dele og 2-delte flanger i forskellige størrelser og former. Alle poser i 1 del og 2-delte flanger har en hudvenlig hydrokolloid-pude til fastgørelse til kroppen, og den er beskyttet inden brug med en frigivelsesfilm, der viser en klippevejledning. Produktposen er fremstillet af lugtbarrierefilm med et komfortabelt, ikke-vævet lag og et kulfilter til lugtkontrol (til ileostomi og colostomi). Ileostomiposer har enten en sammenrullet afløbsåbning, der er sikret med en integreret "velcro"-lukning, eller også er der klemmer og bløde bånd i hver æske. Til urostomi har poserne en blød polymerhane for nem dræning. Alle poser har et vindue til at inspicere stomien, hvis det skulle være nødvendigt. Nogle områder har en ventilationsåbning med låg til udluftning af posen, hvis dette kræves.

Alle ZenSiv Ostomy-produkter er latexfrie og indeholder ikke ingredienser af animalsk oprindelse. Produkterne er ikke-sterile og kan anvendes under alle omstændigheder, hvor den behandlende læge eller sundhedsperson beslutter, at et ikke-sterilt produkt kan anvendes.

Advarsler og forholdsregler

- 
- Hver pose er kun til engangsbrug. Må ikke genbruges. Genbrug kan føre til krydskontaminering.
 - Må kun bruges som anvist af dit sundhedspersonale.
 - Læs instruktionerne inden brug.
 - Afbryd brugen og kontakt dit sundhedspersonale, hvis du oplever allergiske reaktioner eller problemer, når du bruger poserne.

Kontraindikationer

Disse enheder må ikke bruges af personer med en kendt overfølsomhed over for: polyethylen, polyamid, medicinsk trækul, syntetisk polymer, ethylvinylacetat, polypropylen, polyester, polyisobutylen, carboxymethylcellulose, pektin eller glycerin.

Opbevaringsbetingelser

Det er bedst at opbevare dine produkter på et køligt, tørt sted med en temperatur fra 0°C til 27°C som angivet på produktetiketten.

Alvorlige hændelser

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, som følge af brugen af produktet, bedes du straks indberette dette til producenten og den kompetente myndighed i det land, hvor du bor.

Holdbarhed

Skal bruges inden udløbsdatoen, der er angivet på etiketten.

Find dine materialer

Sørg for, at alle nødvendige materialer er klar til brug. Find en målevejledning, en saks, en blyant, våd og tør gaze og en stomipose.

Vælg den rigtige størrelse

Mål din stomi med en målevejledning og klip (om nødvendigt) flangen til den rigtige størrelse, så den passer til stomien. Sørg for at vælge den rigtige størrelse, så stomien og den omgivende hud forbliver sund og rask. Tillad maksimalt et 2 mm mellemrum mellem din stomi og flangen for en sikker og korrekt tilpasning. Hvis størrelsen er for stor, beskadiger din fæces huden. Hvis størrelsen er for lille, vil flangen beskadige stomien. Over tid kan din stomi ændre form eller størrelse, så periodiske målinger kan være nødvendige igen for at forhindre lækager.

Forbered din hud

Støt huden og fjern flangen forsigtigt. Riv den ikke af, men skub huden tilbage fra flangen. Brug om nødvendigt våd gaze. Vask huden omkring din stomi med varmt og uparfumeret vand. Brug ikke noget, der indeholder alkohol, parfume eller æter til at rengøre din hud, da dette kan forårsage skade. Gnid ikke huden for hårdt, da dette kan føre til hudskader. Tør huden forsigtigt og grundigt for at sikre, at din pose klæber godt.

Valgfrit: Hvis din hud er irriteret og øm, kan du bruge en hudbarrierecreme, hydrokolloidpulver eller hudbarriereservietter. Påfør pulver, hudbarrierecreme eller aftør forsigtigt den omgivende hud.

Luk for hanen i bunden af posen

Sørg først for, at hanen er lukket sikkert. Luk hanen ved at trykke hanen fast.

Tilslut din pose til en natpose

Posen har en universal hane. Denne hane kan tilsluttes næsten enhver type og mærke af natposer. Åbn posens han, og tilslut den til natposens stik, og sørg for, at forbindelsen er sikker.

Tilpas din pose

Fjern frigørelsespapiret fra flangen. Fold flangen halvvejs, og placér åbningen på undersiden af stomien. Stræk huden på din mave med en flad hånd, og træk hele flangen over stomien i den rigtige position. Arbejd dig rundt om stomien, så hydrokolloidet fastgøres til huden og sørg for, at flangen er sikker. Placér din hånd over flangen og sørg for, at der skabes en god tætning.

Tøm din pose

Løft hanen op, og åbn hanen. Tøm indholdet af din pose ned i toilettet. Luk hanen igen og sørg for, at den er lukket korrekt.

Vindue

Stomiposen har et vindue, der gør det muligt at inspicere stomien såvel som udgangen fra stomien. Det er også meget nyttigt, når posen påføres for at sikre, at den er placeret korrekt over stomien. Løft det ikke-vævede vindue ved inspektion.

Bortskaf din pose

Fjern din pose og smid den i skraldespanden. Skyl ikke din brugte pose ud i toilettet, da dette kan blokere dit kloaksystem.

Hyppeghed af poseskift

Skift/tøm din pose som anbefalet af dit sundhedspersonale.

ES - Instrucciones de uso

Indicaciones, Descripción del Producto e Información de los Materiales

Las bolsas de ostomía se utilizan para la recogida de desechos corporales y normalmente se fijan alrededor de un estoma quirúrgico.

La gama de productos para las ostomías Zensiv comprenden bolsas de Una Pieza y de Dos piezas y apósitos de Dos Piezas de diversas medidas y formas. Todas las bolsas de Una Pieza y apósitos de Dos Piezas se distinguen por contar con un apósito hidrocólico respetuoso con la piel que se adhiere al cuerpo. Antes de su utilización el apósito está protegido por una película que tiene impresa una guía de diámetros de corte. El producto se produce con una pared laminar que es barrera a los olores con una capa de tejido no tejido y un filtro de carbono para controlar los olores (para ileostomías y colostomías). Las bolsas para ileostomías tienen asimismo un puerto de vaciado enrollable con cierre integral, de tipo 'velcro' o mediante pinzas con sujeciones blandas que se incluyen en cada caja. Las bolsas para urostomía llevan un tapón blanco de polímero para un vaciado fácil. Todas las bolsas tienen ventana para inspeccionar el estoma cuando sea necesario. Algunas gamas tienen un puerto de ventilación con tapa para cuando se requiera evacuar gases.

Todos los productos Zensiv para Ostomías están libres de látex y no contienen ingredientes de origen animal. Los productos son no-estériles y pueden ser utilizados en cualquier circunstancia que sea adecuada en el caso de que el médico o profesional sanitario al cargo decida que se puede utilizar un producto no-estéril.



Advertencias-Precauciones

- Las bolsas son únicamente de un solo uso. No reutilizar. Reutilizar puede ser causa de contaminación cruzada.
- Usar únicamente tras indicación de su profesional sanitario.
- Leer las instrucciones antes de utilizar.
- Dejar de usar y contactar con su profesional sanitaria si experimenta cualquier reacción alérgica o problema al utilizar las bolsas.

Contraindicaciones

No deben utilizarse estos dispositivos por personas con sensibilidad conocida a: polietileno, poliamida, carbón médico, polímeros sintéticos, acetato de etileno-vinilo, polipropileno, poliéster, poliisobutileno, carboximetilcelulosa, pectina o glicerina.

Condiciones de almacenamiento

Se recomienda almacenar sus productos en un lugar seco y fresco con control de temperatura de 0°C a 27°C tal como se indica en la etiqueta de producto.

Incidencias Graves

Si como resultado de la utilización del producto ocurriera una incidencia grave rogamos informe inmediatamente al fabricante y a la Autoridad Competente del país en el que resida.

Permanencia en almacén

Véase la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Reunir materiales

Asegure de tener todos los materiales necesarios preparados para su utilización. Prepare una guía de medidas, unas tijeras, bolígrafo, gasa o toallita seca y húmeda y la bolsa para el estoma.

Elija el tamaño adecuado

Mida su estoma con una guía de medidas y recorte (si es necesario) el apósito al tamaño del estoma. Asegúrese de elegir el tamaño adecuado a fin de que el estoma y la piel circundante se mantengan en buen estado. Para que encaje correctamente, no dejar más de 2 mm entre el estoma y el apósito. Si el tamaño es demasiado grande, las heces lesionarán la piel. Si el tamaño es demasiado pequeño, el apósito dañará el estoma. Con el tiempo, el estoma puede cambiar de tamaño o forma, son por tanto necesario tomar de nuevo medidas de forma periódica para prevenir fugas.

Prepare la piel

Presione la piel y retire el apósito con cuidado, sujete la piel de detrás del apósito y tire del mismo con precaución, si es necesario utilice una gasa húmeda. Limpie la piel periestomal con agua tibia sin perfumar. No utilice nada que contenga alcohol, perfume o éter para limpiar la piel ya que pueden dañarla. No frote la piel con demasiada fuerza pues puede lesionarla. Seque la piel cuidadosamente y a fondo para asegurar que el apósito se fije bien.

Opcional: Si tiene la piel irritada o ulcerada puede utilizar crema protectora, polvos hidrocoloides o toallitas protectoras, que siempre se deben aplicar con suavidad.

Cierre el tapón de la parte inferior de la bolsa

Primeramente, asegúrese que el tapón queda bien cerrado. Cierre el tapón presionando con firmeza.

Conectando la bolsa a la bolsa de drenaje nocturna

La bolsa tiene un tapón universal. El tapón se puede conectar a prácticamente todos los tipos y marcas de bolsas de drenaje. Abra el tapón de la bolsa y conecte la bolsa a la bolsa de drenaje mediante el conector de esta, cerciorándose de que la conexión es segura.

Colocación de la bolsa

Retire el papel protector del apósito. Doble el apósito por la mitad y coloque la apertura de este por encima del estoma. Estire la piel abdominal con la mano plana y coloque el apósito sobre el estoma en la posición correcta. Presione suavemente por encima del apósito alrededor del estoma para asegurar que se fija firmemente. Pase la mano por el contorno del apósito para ver que ha quedado sellado.

Vaciado de la bolsa

Levante el tapón y ábralo. Vacíe el contenido de la bolsa en el inodoro. Cierre de nuevo el tapón asegurándose de que quede bien cerrado.

Ventana de inspección

La bolsa de ostomía incluye una ventana de inspección que permite ver tanto el estoma como el efluente sin retirar la bolsa. Resulta muy útil para saber si se ha situado bien la bolsa. Aparte el panel de tejido no tejido para inspección.

Desecho de la bolsa

Retire la bolsa y déjala en la basura. No tire la bolsa por la inodoro pues podría atascar el Sistema de desagüe.

Frecuencia de cambios de bolsas.

Cambie/vacíe la bolsa siguiendo las recomendaciones del personal sanitario.

Käyttötarkoitus, tuotekuvaus ja materiaalitiedot

Avannepusseja käytetään ulosteen keräämiseksi kehosta, ja ne kiinnitetään yleensä ihoon kirurgisesti tehdyn avanteen päälle.

ZenSivin avannevalikoimaan kuuluu 1- ja 2-osaisia avannepusseja sekä erikokoisia ja -muotoisia kiinnitysrenkaita. Kaikissa 1-osaisissa pusseissa ja 2-osaisissa renkaissa on ihoystävällinen hydrokolloidiekikko kehoon kiinnitystä varten. Ennen käyttöönottoa kiekkoa suojaa irrotuskalvo, jossa on leikkausohje. Tuote on valmistettu hajunestokalvosta, jossa on mukavuutta parantava kuitukerros ja hiilisuodatin hajujen hallintaa varten (ileostomiaa ja kolostomiaa varten). Ileostomiapusseissa on joko rullattava tyhjennysaukko, joka on kiinnitetty kiinteällä tarranauhalla tai vaihtoehtoisesti kunkin pakkauksen mukana tulee kiinnittimiä ja pehmeitä siteitä. Urostomiaa varten pusseissa on pehmeä polymeerihana, joka tekee tyhjentämisestä helppoa. Kaikissa pusseissa on katseluikkuna avanteen tarkistamiseksi tarvittaessa. Joissakin malleissa on kannellinen ilmaventtiili ilman poistamiseksi ulos pussista tai ilman päästämiseksi pussiin tarvittaessa.

ZenSivin avannetuotteet eivät sisällä lateksia eivätkä eläinperäisiä ainesosia. Tuotteet eivät ole steriilejä, ja niitä voidaan käyttää olosuhteissa, joissa hoitava lääkäri tai terveydenhuollon ammattilainen päättää, että ei-steriiliä tuotetta voidaan käyttää.

Varoitukset ja varotoimenpiteet

- Pussit on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Älä käytä niitä uudelleen. Uudelleenkäyttö voi johtaa ristikontaminaatioon.
- Käytä vain terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti.
- Lue ohjeet ennen käyttöä.
- Lopeta käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, jos pussin käyttö aiheuttaa allergisia reaktioita tai koet ongelmia pussin käytössä.

Vasta-aiheet

Henkilöiden, joilla on tiedossa oleva herkkyys polyeteenille, polyamidille, lääkehiillelle, synteettiselle polymeerille, etyleenivinyyliasetaatile, polypropeenille, polyesterille, polyisobuteenille, karboksimeytylliselluloosalle, pektiinille tai glyserolille, ei tule käyttää näitä laitteita.

Varastointiolosuhteet

Tuotteita on parasta säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa, jonka lämpötila on 0°C– 27°C, kuten tuotteen etiketissä on mainittu.

Vakavat vaaratilanteet

Jos tuotteen käytöstä seuraa vakava vaaratilanne, ilmoita siitä välittömästi valmistajalle ja asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Säilyvyys

Käytä etikettiin merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään mennessä.

Kerää tarvittavat materiaalit

Varmista, että kaikki tarvittavat materiaalit ovat käyttövalmiina. Ota mittausopas, sakset, kynä, märkä ja kuiva sideharso sekä avannepusseja esille.

Valitse oikea koko

Mittaa avanteesi mittausohjeiden mukaisesti ja leikkaa (tarvittaessa) rengas oikean kokoiseksi avanteeseen. Varmista, että valitset oikean koon, jotta avanne ja sitä ympäröivä iho pysyvät terveinä. Jätä avanteen ja renkaan väliin enintään 2 mm tilaa turvallisen ja oikean istuvuuden takaamiseksi. Jos koko on liian suuri, ulosteet vahingoittavat ihoa. Jos koko on liian pieni, rengas vahingoittaa avannetta. Ajan myötä avanne voi muuttaa muotoaan tai kokoaan, joten säännöllisiä mittauksia saatetaan edellyttää vuotojen estämiseksi.

Valmistele iho

Tue ihoa ja poista rengas varovasti. Älä repäise, vaan työnnä ihoa pois päin renkaasta, ja käytä tarvittaessa märkää sideharsoa. Pese avannetta ympäröivä iho lämpimällä ja hajustamattomalla vedellä. Älä käytä alkoholia, hajusteita tai eetteriä sisältäviä aineita ihosi puhdistamiseen, sillä ne voivat vahingoittaa ihoa. Älä hiero ihoa liian voimakkaasti välttääksesi ihovauriot. Kuivaa iho huolellisesti ja perusteellisesti varmistaaksesi, että pussi tarttuu hyvin.

Valinnaisesti: Jos ihosi on ärtynyt ja kipeä, voit käyttää ihon suojavoiteita, hydrokolloidijauhetta tai ihonsuojapyyhkeitä. Levitä jauhetta tai ihovoidetta ympäröivälle iholle tai pyyhi iho varovasti ihonsuojapyyhkeellä.

Sulje pussin pohjassa oleva hana

Varmista ensin, että hana on suljettu turvallisesti. Sulje hana painamalla sitä tiukasti.

Pussin liittäminen yösäiliöön

Pussissa on yleishana. Tämä hana voidaan liittää melkein minkä tahansa tyyppiseen ja tuotemerkkiseen yösäiliöön. Avaa pussin hana ja liitä se yösäiliön liittimeen ja varmista, että liitos on pitävä.

Aseta pussi

Irrota renkaan irrotuspaperi. Taita rengas puoliväliin ja aseta aukko avanteen alapuolelle. Venytä vatsasi ihoa tasaisella kädellä ja vedä koko rengas avanteen yli oikeaan asentoon. Käy avanteen ympärystä lävitse varmistaen, että hydrokolloidi kiinnittyy ihoon ja varmista, että rengas on asettunut paikalleen. Aseta kätesi renkaan päälle ja varmista, että se muodostaa hyvän tiiviste.

Pussin tyhjennys

Nosta hana ylös ja avaa se. Tyhjennä pussin sisältö wc-istuimeen. Sulje hana uudelleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.

Katseluikkuna

Avannepusseja sisältää katseluikkunan, jonka avulla voidaan tarkastaa avanne sekä avanteen ulostulo. Ikkunan avulla voidaan myös varmistaa pussia asettaessa, että pussi on asetettu avanteen päälle oikein. Nosta katseluikkunan kuitukangasta tarkistaaksesi avanteen.

Pussin hävittäminen

Irrota pussi ja hävitä se roskien mukana. Älä huuhtelee käytettyä pussia alas wc-istuimesta, sillä se tukkii viemärijärjestelmän.

Pussien vaihtoväli

Vaihda/tyhjennä pussi terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

Notice d'utilisation, description du produit et renseignements sur le matériel

Les poches de colostomie sont utilisées pour recueillir les déchets du corps et sont généralement fixés à la peau sur une stomie opérée.

Zensiv Ostomy comporte une gamme de poches et supports 1 pièce et 2 pièces avec différentes tailles et formes. Tous les supports Zensiv sont munis d'une plaquette hydrocolloïde qui assure une bonne adhésion ainsi qu'une bonne tolérance avec la peau. Avant l'utilisation nos supports sont protégés par un film transparent montrant un guide de coupe. Les poches Zensiv sont fabriquées à partir d'un film protecteur d'odeur avec une couche de tissu non tissé de confort et un filtre au carbone pour le contrôle des odeurs (pour l'iléostomie et la colostomie). Les poches d'iléostomie sont munies d'un orifice d'évacuation à enroulement fixé à l'aide d'un velcro intégré. Pour les poches d'urostomie, les sachets sont munis d'un robinet en polymère souple pour un drainage facile. Toutes les poches ont une fenêtre de visualisation pour inspecter la stomie si nécessaire. Certaines gammes disposent d'un évent avec couvercle pour évacuer la poche si nécessaire.

Tous les produits Zensiv Ostomy sont sans latex et ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale. Les produits ne sont pas stériles et peuvent être utilisés dans toutes les circonstances appropriées lorsque le médecin traitant ou le professionnel de la santé décide qu'un produit non stérile peut être appliqué.

Précautions d'emploi



- Chaque poche est destinée à un usage unique, Ne pas la réutiliser car la réutilisation peut entraîner une contamination croisée.
- Utilisez uniquement selon les directives de votre professionnel de la santé.
- Lisez les instructions avant de les utiliser.
- Cessez de l'utiliser et communiquez avec votre professionnel de la santé si vous avez des réactions allergiques ou des problèmes lors de l'utilisation des poches.

Contre-Indications

Ces dispositifs ne doivent pas être utilisés par quiconque ayant une sensibilité connue au polyéthylène, polyamide, charbon médical, polymère synthétique, acétate d'éthylène et de vinyle, polypropylène, polyester, polyisobutylène, carboxyméthylcellulose, pectine ou glycérine.

Conditions d'entreposage

Il est préférable de stocker vos produits dans un endroit frais et sec avec un guide de la température de 0°C à 27°C, tel qu'indiqué sur l'étiquette du produit.

Incidents graves

Si un incident grave survient à la suite de l'utilisation du produit, veuillez le signaler immédiatement au fabricant et à l'autorité compétente du pays où vous résidez.

Durée de conservation

Utilisation à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette.

Matériel nécessaire pour les poches système 1 pièce

Assurez-vous que tout le matériel nécessaire est prêts à l'emploi. Recueillir un guide de mesure, une paire de ciseaux, stylo, gaze humide et sèche et poche de stomie.

Le choix de la bonne tailles

Mesurez votre stomie avec un guide de mesure et coupez (si nécessaire) le support à la taille de la stomie de sorte que la stomie et la peau environnante restera saine. Prévoyez un espace maximum de 2 mm entre votre stomie et le support pour un ajustement sûr et correct. Si la taille est trop grande, vos selles endommageront la peau et Si la taille est trop petite, la bride endommagera la stomie. Au fil du temps, votre stomie peut changer de forme ou de taille, dans ce cas des mesures périodiques peuvent être nécessaires à nouveau pour éviter toute fuite.

Préparer la peau

Soulever légèrement la peau et retirer soigneusement le support en prenant soin de ne pas le déchirer tout en repoussant la peau du support, utiliser une gaze humide si nécessaire. Lavez la peau entourant votre estomac avec de l'eau chaude. N'utilisez rien qui contient de l'alcool, du parfum ou de l'éther pour nettoyer votre peau car elle peut causer des irritations. Ne frottez pas la peau trop fort car cela pourrait l'endommager. Séchez la peau soigneusement pour assurer une bonne adhésion.

Facultatif : Si votre peau est irritée, vous pouvez utiliser de la crème de barrière cutanée, de la poudre d'hydrocolloïde ou des lingettes de barrière cutanée. Appliquer la poudre, la crème protectrice de la peau en essuyant doucement la peau environnante.

Fermer le robinet à la base de la pochette

Assurez-vous d'abord que le robinet est fermé en toute sécurité. Fermez le robinet en appuyant fermement sur le robinet.

Connexion de la poche à une poche de nuit

La poche a un robinet universel. Ce robinet peut être connecté à presque n'importe quel type et marque de poche de nuit. Ouvrir le robinet de la poche et le connecter au connecteur de la poche de nuit et s'assurer que la connexion est sécurisée.

Ajustez votre poche

Retirez le papier de dégagement du support. Pliez le support à mi-chemin et placez l'ouverture à la face inférieure de la stomie. Étirez la peau de votre abdomen avec une main plate et tirez tout le support sur la stomie dans la bonne position. Faites le tour de la stomie pour que l'hydrocolloïde s'attache à la peau et assurez-vous que le support est bien fixée. Placez votre main sur le support et assurez-vous qu'un bon joint est créé.

Videz votre pochette

Soulevez le robinet et ouvrez-le. Videz le contenu de votre poche dans les toilettes. Refermez le robinet en vous assurant qu'il est bien fermé.

Fenêtre de visualisation

La poche de stomie comprend une fenêtre de visualisation qui permet d'inspecter la stomie ainsi que la sortie de la stomie. Elle est également très utile lors de l'application de la poche pour s'assurer qu'elle est située correctement sur la stomie. Soulever le non-tissé de la fenêtre de visualisation pour l'inspection.

Élimination de pochette

Retirez votre sac et jetez-le à la poubelle. Ne jetez pas votre sac usagé dans les toilettes parce que cela bloquera votre système d'égouts.

Fréquence de changement de pochette

Changez/videz votre poche comme conseillé par votre professionnel de la santé.

Προβλεπόμενη Χρήση, Περιγραφή Προϊόντος και Πληροφορίες Υλικού

Οι οστομικοί σάκοι χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των σωματικών αποβλήτων και στερεώνονται συνήθως στο δέρμα επί μιας χειρουργικά δημιουργηθείσας στομίας.

Τα οστομικά προϊόντα Zensiv περιλαμβάνουν οστομικούς σάκους 1 και 2 τεμαχίων και βάσεις 2 τεμαχίων σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Όλοι οι σάκοι 1 τεμαχίου και οι βάσεις 2 τεμαχίων διαθέτουν φιλικό προς το δέρμα υδροκολλοειδές υλικό για επικόλληση στο σώμα, το οποίο πριν από τη χρήση καλύπτεται με προστατευτική ταινία και φέρει οδηγό κοπής. Ο σάκος είναι κατασκευασμένος από άοσμη μεμβράνη και φέρει μη υφασμένο κάλυμμα και φίλτρο άνθρακα για τον έλεγχο των οσμών (ειλεοστομία και κολοστομία). Οι σάκοι ειλεοστομίας διαθέτουν τυλιγόμενη έξοδο αποστράγγισης, με ενσωματωμένο ασφαλιστικό κλείστρο τύπου “velcro” ή πλαστικό. κλείστρο ή αυτοκόλλητο έλασμα, που περιέχονται σε κάθε συσκευασία. Στην ουρητηροστομία, οι σάκοι φέρουν βρυσάκι από μαλακό πολυμερές υλικό για εύκολη αποστράγγιση. Οι σάκοι διαθέτουν παράθυρο για την επισκόπηση της στομίας, αν χρειαστεί. Μερικοί σάκοι διαθέτουν έξοδο εξαερισμού με τάπα (vent) για τον αερισμό του σάκου, αν απαιτηθεί.

Τα οστομικά προϊόντα ZenSiv δεν περιέχουν λάτεξ και συστατικά ζωικής προέλευσης. Τα προϊόντα είναι μη αποστειρωμένα και εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θεράπων ιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μη αποστειρωμένα προϊόντα.

Προειδοποιήσεις-Προφυλάξεις

- Κάθε σάκος είναι μίας χρήσης. Μην επαναχρησιμοποιείτε. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση.
- Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού.
- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση.
- Αν αντιμετωπίσετε αλλεργικές αντιδράσεις ή προβλήματα κατά τη χρήση του σάκου, διακόψτε τη χρήση του και επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό σας.

Αντενδείξεις

Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στα ακόλουθα υλικά: πολυαιθυλένιο, πολυαμίδιο, ιατρικός άνθρακας, συνθετικά πολυμερή, αιθυλένιο, οξικός βινυλεστέρας, πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας, πολυισοβουτυλένιο, καρβοξυμεθυλική κυτταρίνη, τηκτίνη ή γλυκερίνη.

Συνθήκες Αποθήκευσης

Τα προϊόντα αποθηκεύονται κατά προτίμηση σε δροσερό και ξηρό μέρος, με ένδειξη θερμοκρασίας από 0ο έως 27ο βαθμούς Κελσίου, όπως αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

Σοβαρά Περιστατικά

Αν παρουσιαστεί σοβαρό περιστατικό, συνεπεία χρήσης του προϊόντος, παρακαλούμε να το αναφέρετε αμέσως στον κατασκευαστή και την Αρμόδια Αρχή της χώρας που διαμένετε.

Διάρκεια ζωή

Συμβουλευτείτε την ημερομηνία λήξης της ετικέτας.

Συγκεντρώστε τα υλικά σας

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα υλικά είναι έτοιμα για χρήση. Συγκεντρώστε έναν χάρακα, ένα ψαλίδι, ένα στυλό, βρεγμένες και στεγνές γάζες και έναν οστομικό σάκο.

Επιλέξτε το σωστό μέγεθος

Μετρήστε τη στομία με τον χάρακα και κόψτε (αν είναι απαραίτητο) τη βάση στο σωστό μέγεθος της στομίας. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το σωστό μέγεθος, ώστε η στομία και το περιβάλλον δέρμα να παραμείνουν υγιή. Για σωστή και ασφαλή τοποθέτηση, αφήστε μέγιστο περιθώριο 2 χιλιοστών μεταξύ της στομίας και της βάσης. Αν το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο, τα περιττώματά σας θα βλάψουν το δέρμα. Αν το μέγεθος είναι πολύ μικρό, η βάση θα τραυματίσει τη στομία. Με τον καιρό, η στομία μπορεί να αλλάξει σχήμα και μέγεθος, οπότε περιοδικές μετρήσεις είναι απαραίτητες για την πρόληψη των διαρροών.

Προετοιμάστε το δέρμα σας

Στηρίξτε το δέρμα και αφαιρέστε προσεκτικά τη βάση, μην τραβάτε το δέρμα, αλλά σπρώξτε το μακριά από τη βάση, χρησιμοποιώντας μια βρεγμένη γάζα αν είναι απαραίτητο. Ξεπλύνετε το δέρμα γύρω από τη στομία με χλιαρό, μη αρωματισμένο νερό. Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε προϊόν περιέχει οινόπνευμα, άρωμα ή αιθέρα για να καθαρίσετε το δέρμα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τρίβετε πολύ δυνατά το δέρμα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Στεγνώστε επιμελώς το δέρμα για να εξασφαλίσετε την καλή επικόλληση του σάκου.

Προαιρετικό: Αν το δέρμα σας είναι ερεθισμένο και επώδυνο, χρησιμοποιήστε μια κρέμα φραγμού, υδροκολλοειδή σκόνη ή μαντηλάκια προστασίας. Εφαρμόστε τη σκόνη ή την κρέμα στο περιβάλλον δέρμα ή σκουπίστε το μαλακά με τα μαντηλάκια.

Κλείστε το βρυσάκι στη βάση του σάκου

Αρχικά σιγουρευτείτε ότι το βρυσάκι είναι ασφαλισμένο. Κλείστε το βρυσάκι πιέζοντας σφιχτά την τάπα.

Συνδέστε το σάκο σας σε έναν ουροσυλλέκτη νυκτός

Ο σάκος έχει βρυσάκι γενικού τύπου. Το βρυσάκι αυτό μπορεί να συνδεθεί με ουροσυλλέκτες σχεδόν κάθε τύπου και μάρκας. Ανοίξτε το βρυσάκι του σάκου, ενώστε το στο συνδετικό του ουροσυλλέκτη και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.

Εφαρμόστε το σάκο σας

Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από τη βάση. Διπλώστε τη βάση στη μέση και τοποθετήστε το άνοιγμά της στο κάτω μέρος της στομίας. Τεντώστε το δέρμα της κοιλιάς σας με την παλάμη σας και φέρετε τη βάση στη σωστή θέση πάνω από τη στομία. Συνεχίστε την εφαρμογή γύρω από τη στομία, ώστε το υδροκολλοειδές να προσκολληθεί στο δέρμα και βεβαιωθείτε ότι η βάση παραμένει σταθερή. Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από τη βάση για να εφαρμόσει καλά.

Αδειάστε το σάκο σας

Ανασηκώστε το βρυσάκι και ανοίξτε την τάπα. Αδειάστε το περιεχόμενο του σάκου σας στην τουαλέτα. Κλείστε ξανά την τάπα και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένη.

Παράθυρο επισκόπησης

Ο οστομικός σάκος διαθέτει ένα παράθυρο που επιτρέπει την επισκόπηση της στομίας καθώς και του προϊόντος της στομίας. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο, κατά την εφαρμογή του σάκου, για τον έλεγχο της σωστής τοποθέτησής του επί της στομίας. Για την επισκόπηση, ανασηκώστε το μη υφασμένο κάλυμμα του παραθύρου.

Η απόρριψη του σάκου σας

Αφαιρέστε το σάκο σας και απορρίψτε τον στα σκουπίδια. Μην απορρίψετε τον σάκο στην τουαλέτα, γιατί αυτό μπορεί να φράξει το αποχετευτικό σας σύστημα.

Η συχνότητα αλλαγής του σάκου

Αλλάξτε ή αδειάστε το σάκο σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού σας.

HR - Upute za uporabu

Predviđena uporaba, opis sustava i podaci o materijalu

Vrećice za stomu koriste se za sakupljanje otpadnih tvari iz tijela i obično se privijaju uz kožu preko kirurškim putem napravljene stome.

Proizvodi tvrtke Zensiv Ostomy uključuju niz jednodijelnih i dvodijelnih vrećica za stomu i dvodijelnih prirubnica u raznim veličinama i oblicima. Sve jednodijelne vrećice i dvodijelne prirubnice imaju hidrokoloidnu prijanjajuću površinu koja ne oštećuje kožu te je zaštićena filmom s oznakom za rezanje. Vrećica za stomu proizvodi se od materijala otpornog na mirise s netkanim slojem i ugljičnim filtrom za kontrolu mirisa (za ileostomu i kolostomu). Svaka kutija vrećice za ileostomu sadrži i namotani dren pričvršćen remenom „na čičak” ili stezaljke i meke remene. Vrećice za urostomu sadrže mekani čep od polimera za jednostavniju drenažu. Sve vrećice sadrže prozorčić za inspekciju stome prema potrebi. Određeni asortiman sadrži i ventil za prozračivanje stome prema potrebi.

Svi proizvodi tvrtke Zensiv Ostomy ne sadrže lateks i sastojke životinjskog podrijetla. Proizvodi su nesterilni i mogu se koristiti u svim slučajevima u kojima je liječnik ili zdravstveni djelatnik odobrio uporabu nesterilnog proizvoda.

Upozorenja – predostrožnosti

- Sve su vrećice za jednokratnu uporabu. Nemojte ih ponovno upotrebljavati. Ponovna uporaba može dovesti do unakrsne kontaminacije.
- Koristite ih samo u skladu s uputama svog pružatelja primarne zdravstvene zaštite.
- Pročitajte upute prije uporabe.
- U slučaju alergijske reakcije ili problema prilikom uporabe vrećica, prestanite ih koristiti i kontaktirajte svog pružatelja primarne zdravstvene zaštite.

Kontraindikacije

Ovi proizvodi ne bi trebale koristiti osobe koje su osjetljive na: polietilen, poliamid, medicinski ugljen, sintetički polimer, etilen vinil acetat, polipropilen, poliester, polizobutilen, karboksimetilcelulozu, pektin ili glicerol.

Uvjeti skladištenja

Najbolje je čuvati proizvode na hladnom, suhom mjestu na temperaturi između 0°C i 27°C kako je navedeno na oznaci proizvoda.

Ozbiljne posljedice

Ukoliko dođe do ozbiljne posljedice uslijed uporabe proizvoda, odmah to prijavite proizvođaču ili nadležnom tijelu u vašoj zemlji boravišta.

Rok trajanja

Upotrijebiti do roka uporabe na označi proizvoda.

Pripremite potrebne materijale

Provjerite jesu li svi materijali spremni za uporabu. Pripremite pribor za mjerenje, škare, kemijsku olovku, vlažnu i suhu gazu te vrećicu za stomu.

Odaberite ispravnu veličinu

Izmjerite stomu priborom za mjerenje i izrežite prirubnicu (ako je potrebno) na veličinu stome. Provjerite jeste li odabrali ispravnu veličinu kako ne biste oštetili stomu i okolnu kožu. Za sigurnu upotrebu ostavite najmanje 2 mm prostora između stome i prirubnice. Ako je prirubnica prevelika, vaš će izmet oštetiti stomu. Ako je premalena, prirubnica će oštetiti stomu. S vremenom vaša će stoma promijeniti oblik ili veličinu, stoga su potrebna povremena mjerenja kako bi se spriječilo curenje.

Pripremite kožu

Pridržite kožu i pažljivo uklonite prirubnicu. Nemojte otrgnuti, već odmaknite kožu od prirubnice. Upotrijebite vlažnu gazu ako je potrebno. Operite kožu oko stome mlakom i neparfumiranom vodom. Nemojte koristiti proizvode koji sadrže alkohol, parfem ili eter za čišćenje kože jer je možete oštetiti. Nemojte pretjerano jako trljati kožu jer je možete oštetiti. Pažljivo osušite kožu i temeljito provjerite prijanja li vrećica ispravno. Prema izboru: Ako dođe do iritacije ili oštećenja kože, možete upotrijebiti kremu za njegu kože Barrier, hidrokoloidni prah ili maramice za zaštitu kože Barrier. Na okolnu kožu nježno nanosite prah, kremu za njegu kože Barrier ili je maramicu.

Zatvorite čep na dnu vrećice

Provjerite je li čep zatvoren. Čvrsto pritisnite čep da biste ga zatvorili.

Povezivanje vrećice s noćnom vrećicom

Vrećica ima univerzalni čep. Taj se čep može namjestiti na bilo koju vrstu noćne vrećice. Otvorite čep vrećice i povežite ga na priključak noćne vrećice te provjerite je li čvrsto povezan.

Namjestite vrećicu

Uklonite zaštitni omot prirubnice. Savijte pločicu do pola i pričvrstite je na donju stranu stome. Otvorenim dlanom nategnite kožu abdomena i navucite prirubnicu preko stome u ispravan položaj. Provjerite prijanja li hidrokoloidna površina dobro na kožu oko stome te je li prirubnica pričvršćena. Pritisnite rukom prirubnicu kako biste provjerili je li dobro pričvršćena.

Ispraznite vrećicu

Podignite i otvorite čep. Ispraznite sadržaj vrećice u toalet. Ponovno zatvorite čep i provjerite je li dobro zatvoren.

Prozorčić za inspekciju

Vrećica za stomu sadrži i prozorčić za inspekciju pomoću kojeg možete provjeriti stanje stome kao i sadržaj koji iz nje izlazi. Prilikom primjene vrećice važno je provjeriti je li ispravno položena preko stome. Za provjeru stome podignite netkani dio prozorčića za inspekciju.

Odstranjivanje vrećice

Skinite vrećicu i odstranite je u otpad. Nemojte pustiti vrećicu niz toalet jer ćete začepiti odvodni sustav kanalizacije.

Učestalost promjene vrećice

Promijenite/ispraznite vrećicu u skladu s uputama svog pružatelja primarne zdravstvene zaštite.

ID - Petunjuk Penggunaan

Tujuan Penggunaan, Deskripsi Produk, dan Informasi Material

Kantong ostomi digunakan untuk mengumpulkan limbah dari tubuh dan biasanya ditempelkan pada kulit di atas stoma yang dibuat dengan pembedahan.

Produk Zensiv Ostomy adalah rangkaian kantong ostomi 1 bagian dan 2 bagian serta flensa 2 bagian dalam berbagai ukuran dan bentuk. Semua kantong 1 bagian dan flensa 2 bagian menampilkan wafer hidrokoloid yang ramah kulit untuk adhesi ke tubuh dan ini dilindungi sebelum digunakan dengan film pelepas yang menunjukkan panduan pemotongan. Kantong produk dibuat dari film penghalang bau dengan lapisan non-anyaman yang nyaman dan filter karbon untuk pengendalian bau (untuk ileostomi dan kolostomi). Kantong ileostomi memiliki saluran pembuangan yang digulung yang diamankan dengan penutup tipe 'velcro' integral atau ada klem dan ikatan lunak yang disediakan di setiap kotak. Untuk urostomi, kantong membawa keran polimer lembut untuk drainase yang mudah. Semua kantong memiliki jendela untuk memeriksa stoma jika diperlukan. Beberapa rentang memiliki ventilasi dengan penutup untuk melepaskan isi kantong jika diperlukan.

Semua produk ZenSiv Ostomy bebas lateks dan tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari hewan. Produk tidak steril dan dapat digunakan dalam keadaan yang sesuai di mana dokter yang merawat atau profesional kesehatan memutuskan produk tidak steril dapat digunakan.

Peringatan - Tindakan Pencegahan

- Setiap kantong hanya untuk sekali pakai. Jangan digunakan kembali. Penggunaan kembali dapat menyebabkan kontaminasi silang.
- Gunakan hanya seperti yang diarahkan oleh profesional kesehatan Anda.
- Baca petunjuk sebelum digunakan.
- Hentikan penggunaan dan hubungi ahli kesehatan Anda jika Anda mengalami reaksi alergi atau masalah saat menggunakan kantong.

Kontra indikasi

Perangkat ini tidak boleh digunakan oleh siapa pun yang diketahui sensitif terhadap: polietilen, poliamida, arang medis, polimer sintetis, etilena vinil asetat, polipropilena, poliester, poliisobutilena, karboksimetilselulosa, pektin atau gliserin.

Ketentuan penyimpanan

Sebaiknya simpan produk Anda di tempat kering yang sejuk dengan panduan suhu dari 0°C hingga 27°C seperti yang tertera pada label produk.

Insiden Serius

Jika terjadi insiden serius akibat penggunaan produk, harap segera laporkan hal ini kepada produsen dan Otoritas Kompeten di negara tempat Anda tinggal.

Umur simpan

Gunakan sebelum tanggal kedaluwarsa yang tertera pada label.

Kumpulkan bahan Anda

Pastikan semua bahan yang diperlukan sudah siap digunakan. Kumpulkan panduan pengukuran, gunting, pena, kain kasa basah dan kering, dan kantong stoma.

Pilih ukuran yang tepat

Ukur stoma Anda dengan panduan pengukur dan potong (jika perlu) flensa ke ukuran stoma yang tepat. Pastikan Anda memilih ukuran yang tepat agar stoma dan kulit di sekitarnya tetap sehat. Berikan jarak maksimum 2 mm antara stoma dan flensa Anda untuk pemasangan yang aman dan tepat. Jika ukurannya terlalu besar, kotoran Anda akan merusak kulit. Jika ukurannya terlalu kecil, flange akan merusak stoma. Seiring waktu, stoma Anda dapat berubah bentuk atau ukuran, jadi pengukuran berkala mungkin diperlukan lagi untuk mencegah kebocoran.

Siapkan kulitmu

Topang kulit dan lepaskan flens dengan hati-hati, jangan sobek tetapi dorong kulit kembali dari flensa, gunakan kain kasa basah jika perlu. Cuci kulit di sekitar stoma Anda dengan air hangat dan tanpa pewangi. Jangan gunakan apapun yang mengandung alkohol, parfum atau eter untuk membersihkan kulit Anda karena dapat menyebabkan kerusakan. Jangan menggosok kulit terlalu keras karena dapat menyebabkan kerusakan kulit. Keringkan kulit dengan hati-hati dan menyeluruh untuk memastikan kantong Anda menempel dengan baik.

Opsional: Jika kulit Anda teriritasi dan sakit, Anda dapat menggunakan krim pelindung kulit, bubuk hidrokoloid, atau tisu pelindung kulit. Oleskan bedak, krim pelindung kulit atau usap dengan lembut ke kulit di sekitarnya.

Tutup keran di dasar kantong

Pertama-tama pastikan keran ditutup dengan aman. Tutup keran dengan menekan keran dengan kuat.

Menghubungkan kantong Anda ke kantong tidur

Kantong memiliki keran universal. Keran ini bisa disambungkan ke hampir semua jenis dan merek tas malam. Buka keran kantong dan sambungkan ini ke konektor tas malam dan pastikan sambungannya aman.

Sesuaikan kantong Anda

Lepaskan kertas pelepas flensa. Lipat flange setengah dan tempatkan bukaan di bagian bawah stoma. Regangkan kulit perut Anda dengan tangan rata dan tarik seluruh flensa di atas stoma ke posisi yang tepat. Kerjakan di sekitar stoma sehingga hidrokoloid akan menempel pada kulit dan pastikan flensanya aman. Letakkan tangan Anda di atas flensa dan pastikan segel yang baik telah dibuat.

Mengosongkan Kantong Anda

Angkat keran dan buka keran. Kosongkan isi kantong Anda ke dalam toilet. Tutup ketuk lagi untuk memastikan tertutup dengan aman.

Jendela tampilan

Kantong ostomi mencakup jendela tampilan yang memungkinkan untuk memeriksa stoma serta keluaran dari stoma. Ini juga sangat membantu saat mengosongkan kantong untuk memastikannya terletak dengan benar di atas stoma. Angkat non-anyaman dari jendela tampilan untuk diperiksa.

Buang kantong Anda

Keluarkan kantong Anda dan buang ke tempat sampah. Jangan membuang kantong bekas Anda ke toilet karena ini akan menyumbat sistem pembuangan kotoran Anda.

Frekuensi penggantian kantong

Ganti/kosongkan kantong Anda seperti yang disarankan oleh ahli kesehatan Anda.

LT - Naudojimo instrukcijos

Paskirtis, gaminio aprašas ir medžiagu informacija

Ostomijos maišeliai naudojami atliekoms iš kūno surinkti ir paprastai pritvirtinami prie odos per chirurginiu būdu įvestą stomą.

„Zensiv Ostomy“ gaminiai yra įvairių dydžių ir formų vienos ir dviejų dalių ostomijos maišeliai su dviejų dalių jungėmis (flanšais). Visuose vienos dalies maišeliuose ir dviejų dalių flanšuose yra odą tausojanti hidrokoloidinė plokštelė, skirta klijuoti prie kūno, ir iki naudojimo ji yra apsaugota nuimama plėvele, kurioje pavaizduota, kaip tiksliai atlikti pjūvį. Gaminio maišelis pagamintas iš kvapus sulaikančios plėvelės su patogiu neaustiniu sluoksniu ir anglies filtru kvapams kontroliuoti (ileostomijai ir kolostomijai). Ileostomijos maišeliai turi arba suvyniojamą išleidimo portą, pritvirtintą integruotu lipni uždarymo įtaisu, arba kiekvienoje dėžutėje yra pridėdami reikalingi spaustukai ir minkšti dirželiai. Urostomijai skirtuose maišeliuose yra minkštas polimerinis kranelis paprastam drenavimui. Visuose maišeliuose yra stebėjimo langelis stomai apžiūrėti (jei reikia). Kai kuriuose modeliuose yra entiliacijos anga su dangteliu, jei reikėtų išleisti maišelio turinį.

Visuose „ZenSiv Ostomy“ gaminiuose nėra latekso ir nėra gyvūninės kilmės ingredientų. Gaminiai yra nesterilūs ir gali būti naudojami bet kokiomis tinkamomis aplinkybėmis, kai gydantis gydytojas ar sveikatos priežiūros specialistas nusprendžia, kad galima naudoti nesterilų gaminį.

Įspėjimai - atsargumo priemonės

- Kiekvienas maišelis skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Nenaudoti pakartotinai. Pakartotinai naudojant galima kryžminė tarša.
- Naudoti tiksliai pagal gydytojo nurodymą.
- Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas.
- Nutraukite naudojimą ir kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą, jei naudojant maišelius pasireiškia alerginės reakcijos ar problemos.

Kontraindikacijos

Šių prietaisų neturėtų naudoti asmenys, kurie yra jautrūs: polietilenui, poliamidui, medicininės medžio angliai, sintetiniam polimerui, etileno vinilacetatui, polipropileniui, poliesteriui, polizobutileniui, karboksimetilceliuliozei, pektinui arba glicerinui.

Laikymo sąlygos

Geriausia laikyti gaminius vėsioje, sausoje vietoje, kurioje temperatūra būtų nuo 0°C iki 27°C, kaip nurodyta gaminio etiketėje.

Rimti incidentai

Jei naudojant gaminį įvyksta rimtas incidentas, nedelsdami praneškite apie tai gamintojui ir šalies, kurioje gyvenate, kompetentingai institucijai.

Tinkamumo laikas

Tinkamumo laikas, nurodytas ant etiketės.

Surinkite visas medžiagas

Įsitikinkite, kad visos reikalingos medžiagos paruoštos naudoti. Paimkite matavimo kreiptuvą, žirkles, švirkštiklį, drėgną ir sausą marlę ir stomos maišelį.

Pasirinkite tinkamą dydį

Išmatuokite stomą naudodami matavimo kreiptuvą ir nupjaukite (jei reikia) jungę iki reikiamo stomos dydžio. Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą dydį, kad stoma ir aplinkinė oda išliktų sveika. Palikite ne daugiau kaip 2 mm tarpelį tarp stomos ir jungės, kad būtų galima įstatyti saugiai ir tinkamai. Jei dydis per didelis, išmatos gali pažeisti odą. Jei dydis per mažas, jungė sugadins stomą. Laikui bėgant jūsų stomos dydis ar forma gali pasikeisti, todėl gali prireikti periodiškai atlikti matavimus, kad būtų išvengta bet kokio nuotėkio.

Paruoškite odą

Prilaikykite odą ir atsargiai nuimkite jungę, nenuplėškite, o atitraukite odą atgal nuo jungės, jei reikia, naudokite drėgną marlę. Nuplaukite odą aplink stomą šiltu neparfumuotu vandeniu. Odai valyti nenaudokite jokių priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, kvėpalų ar eterio, nes jos gali pažeisti odą. Netrinkite per stipriai, nes tai gali pažeisti odą. Kruopščiai ir kruopščiai nusauskite odą, kad maišelis gerai prikibtų.

Pasirinktinai: Jei oda sudirginta ir skauda, galite naudoti odos barjerinį kremą, hidrokoloidinius miltelius arba odos barjerines servetėles. Užtepkite miltelių, apsauginio odos kremo arba švelniai nušluostykite aplinkinę odą.

Uždarykite maišelio apačioje esantį kranelį

Visada įsitikinkite, kad kranelis saugiai uždarytas. Uždarykite kranelį jį tvirtai paspausdami.

Maišelio prijungimas prie naktinio surinkimo maišelio

Maišelyje yra universalus kranelis. Šį kranelį galima prijungti prie beveik bet kokio tipo ir prekės ženklo naktinio surinkimo maišelio. Atidarykite maišelio kranelį, prijunkite jį prie naktinio surinkimo maišelio jungties ir įsitikinkite, kad jungtis sujungta tvirtai.

Pritvirtinkite maišelį

Nuimkite apsauginę plėvelę nuo jungės. Sulenkite jungę iki pusės ir įleiskite į angą stomos apačioje. Ištempkite pilvo odą ištiestu delnu ir patraukite visą jungę virš stomos į reikiamą padėtį. Hidrokoloidą prilipinkite prie odos aplink stomą ir įsitikinkite, kad jungė yra sujungta patikimai. Uždėkite ranką ant jungės ir įsitikinkite, kad surinkimo sistema tinkamai užsandarinta.

Ištuštinkite maišelį

Pakelkite ir atidarykite kranelį. Išpilkite maišelio turinį į tualetą. Dar kartą uždarykite kranelį ir įsitikinkite, kad jis saugiai uždarytas.

Tikrinimo langelis

Ostomijos maišelyje yra tikrinimo langelis, leidžiantis apžiūrėti stomą ir išėjimą iš stomos. Taip pat labai svarbu uždedant maišelį įsitikinti, kad jis tinkamai uždėtas virš stomos. Kai norite patikrinti vidų, pakelkite neaustinę tikrinimo langelio medžiagą.

Maišelio išmetimas

Nuimkite maišelį ir išmeskite jį su šiukšlėmis. Nepilkite panaudoto maišelio turinio į tualetą, nes tai užkimš nuotekų sistemą.

Maišelio keitimo dažnumas

Pakeiskite/ištuštinkite maišelį taip, kaip nurodė sveikatos priežiūros specialistas.

LV - Lietošanas instrukcija

Paredzētais lietojums, izstrādājuma apraksts un informācija par materiāliem

Ostomijas maisiņus izmanto urīna un fekāliu savākšanai, un tos parasti piestiprina pie ādas virs ķirurģiski izveidotas stomas.

Zensiv Ostomy izstrādājumi ir dažādi viendabīgi un divdabīgi ostomijas maisiņi un dažādu izmēru un formu divdabīgas pamatnes. Visiem viendabīgajiem maisiņiem un divdabīgajām pamatnēm ir ādu saudzējošs hidrokoloida slānis, kas paredzēts pielīmēšanai pie ķermeņa, un pirms lietošanas to aizsargā noņemama plēvi, uz kuras ir redzama griešanas norāde. Izstrādājuma maisiņš ir izgatavots no smalkas aizturošas plēves ar ērtu neaustu slāni un oglekļa filtru smaku neitralizēšanai (ileostomijai un kolostomijai). Ileostomijas maisiņiem ir sarullējama drenāža, kas nostiprināta ar iestrādātu līplentes aizdari, vai arī katrā kārbā ir skavas un mīksts saites. Urostomijas maisiņiem ir mīksts polimēra krāns, lai varētu viegli veikt drenāžu. Visiem maisiņiem ir skata lodziņš, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārbaudīt stomu. Dažiem izstrādājumiem ir ventilācija ar vāciņu, lai nepieciešamības gadījumā izvēdinātu maisiņu.

Visi ZenSiv Ostomy izstrādājumi ir bez lateksa un nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas. Izstrādājumi ir nesterili, un tos var izmantot jebkuros piemērotos apstākļos, kad ārstējošais ārsts vai veselības aprūpes speciālists nolēmj lietot nesterilu izstrādājumu.

Brīdinājumi—piesardzības pasākumi

- Katrs maisiņš ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Nelietojiet atkārtoti. Atkārtota lietošana var izraisīt savstarpēju piesārņojumu.
- Lietojiet tikai atbilstoši veselības aprūpes speciālista norādījumiem.
- Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.
- Pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, ja, lietojot maisiņus, rodas alerģiskas reakcijas vai problēmas.

Kontrindikācijas

Šīs ierīces nedrīkst lietot personas, kurām ir zināma jutība pret: polietilēnu, poliamīdu, medicīnisko ogli, sintētisko polimēru, etilēna vinilacetātu, polipropilēnu, poliesteru, polizobutilēnu, karboksimetilcelulozi, pektīnu vai glicerīnu.

Glabāšanas nosacījumi

Izstrādājumus vislabāk glabāt vēsā, sausā vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz 27°C, kā norādīts izstrādājuma etiķetē.

Nopietni negadījumi

Ja izstrādājuma lietošanas rezultātā rodas nopietns negadījums, lūdzu, nekavējoties ziņojiet par to ražotājam un kompetentajai iestādei valstī, kurā dzīvojat.

Glabāšanas laiks

Izlietot līdz derīguma termiņam, kas norādīts uz etiķetes.

Paņemiet materiālus

Pārlicinieties, vai visi nepieciešamie materiāli ir gatavi lietošanai. Paņemiet izmēru rādītāju, šķēres, pildspalvu, mitru un sausu marli un stomas maisiņu.

Pareizā izmēra izvēle

Izmēriet savu stomu ar izmēru rādītāju un izgrieziet (ja nepieciešams) pamatni atbilstoši stomas izmēram. Pārlicinieties, vai esat izvēlējis pareizo izmēru, lai stoma un apkārtējā āda paliktu vesela. Lai droši un pareizi sastiprinātu stomu un pamatni, atstājiet starp tām ne vairāk kā 2 mm atstarpi. Ja izmērs ir pārāk liels, feces sabojās ādu. Ja izmērs ir pārāk mazs, pamatne sabojās stomu. Laika gaitā stomas forma vai izmērs var mainīties, tāpēc periodiski var būt nepieciešams atkārtot mērīšanu, lai novērstu jebkādu nopliedi.

Ādas sagatavošana

Atbaltiet ādu un uzmanīgi noņemiet pamatni; nenoplēšiet, bet atvirziet ādu no pamatnes, ja nepieciešams, izmantojot mitru marli. Nomazgājiet ādu ap stomu ar siltu un nearomatizētu ūdeni. Ādas notīrīšanai nelietojiet neko tādu, kas satur spirtu, parfīmu vai ēteri, jo tas var radīt bojājumus. Neberzējiet ādu pārāk stipri, jo tas var izraisīt ādas bojājumus. Rūpīgi un kārtīgi nosusiniet ādu, lai maisiņš labi pieliptu. Pēc izvēles: Ja āda ir iekaisusi un sāpīga, varat izmantot ādas aizsargkrēmu, hidrokoloida pulveri vai ādu aizsargājošas salvetes. Uzklājiet pulveri, ādas aizsargkrēmu vai saudzīgi noslaukiet apkārtējo ādu.

Krāna aizvēršana pie maisiņa pamatnes

Vispirms pārlicinieties, vai krāns ir stingri aizvērts. Aizveriet krānu, to stingri piespiežot.

Maisiņa pievienošana nakts maisiņam

Maisiņam ir universāls krāns. Šo krānu var savienot ar gandrīz jebkura veida un zīmola nakts maisiņu. Atveriet maisiņa krānu, pievienojiet to nakts somas savienotājam un pārlicinieties, vai savienojums ir drošs.

Maisiņa uzstādīšana

Noņemiet pamatnes aizsargpapīru. Salokiet pamatni uz pusēm un novietojiet atveri stomas apakšpusē. Nostiepiet vēdera ādu ar plaukstu un pārvelciet visu pamatni pāri stomai pareizā stāvoklī. Izlīdziniet pamatni ap visu stomu tā, lai hidrokoloids pieliptu pie ādas, un pārlicinieties, vai pamatne ir kārtīgi pielipusi. Uzlieciet roku uz pamatnes un pārlicinieties, vai tā ir kārtīgi pielipusi.

Maisiņa iztukšošana

Paceliet krānu un atveriet to. Maisiņa saturu iztukšojiet tualetes podā. Aizveriet krānu un pārlicinieties, vai tas ir droši aizvērts.

Skata lodziņš

Ostomijas maisiņam ir skata lodziņš, kas ļauj pārbaudīt stomu, kā arī izdalījumus no stomas. Tas ir arī ļoti noderīgs, piestiprinot maisiņu, lai pārlicinātos, vai tas ir pareizi novietots virs stomas. Lai veiktu pārbaudi, paceliet skata lodziņa neaustā auduma aizsegu.

Maisiņa likvidēšana

Noņemiet maisiņu un izmetiet to atkritumu tvertnē. Neaizskalojiet izlietoto maisiņu tualetes podā, jo tas nosprostos kanalizācijas sistēmu.

Maisiņa maiņas biežums

Nomainiet/iztukšojiet maisiņu atbilstoši veselības aprūpes speciālista ieteikumiem.

NO - Bruksanvisning

Beregnet bruk, produktbeskrivelse og materiell informasjon

Stomiposer brukes for å samle opp avfall fra kroppen og er vanligvis festet på huden over en kirurgisk fremstilt stomi.

Zensiv stomiprodukter er en serie stomiposer med 1-dels og 2-dels og plater i forskjellige sorter/varianter, størrelser og former. Alle 1-dels poser og 2-dels plater har en hudvennlig hydrokolloidplate for feste til kroppen og dette blir beskyttet før bruk med en beskyttelsesfilm med utklippsmarkeringer. Produktposen er produsert av en luktkbarrierefilm med et komfortfritt ikke-vevd lag og et karbonfilter for lukt kontroll (for ileostomi og kolostomi). Ileostomi posen har enten en sammenrullbar avløpsport sikret med en integrert «borrelås» lukning, eller det er klemmer og myke bånd som leveres i hver eske. Urostomi posen har en myk polymer kran for enkel drenering. Alle posene har et visningsvindu for å inspisere stomien om nødvendig. Visse poser har en lufteluke for å ventilere posen ved behov.

Alle ZenSiv stomiprodukter er latexfrie og inneholder ikke ingredienser av animalsk opprinnelse. Produktene er ikke-sterile og kan brukes under alle mulige omstendigheter der den behandlede legen eller omsorgspersonale bestemmer at et ikke-sterilt produkt kan brukes.

Advarsler-forholdsregler



- Hver pose er kun til engangsbruk. Skal ikke gjenbrukes. Gjenbruk kan føre til krysskontaminering.
- Brukes bare i henhold til instruksjonene fra helsepersonellet.
- Les instruksjonene før bruk.
- Avbryt bruken og ta kontakt med helsepersonellet om du opplever allergiske reaksjoner, eller problem når du bruker posene.

Kontraindikasjoner

Disse enheter bør ikke brukes av noen med kjent følsomhet for: polyeten, polyamid, medisinsk kull, syntetisk polymer, etylenvinylacetat, polypropylen, polyester, polyisobutylene, karboximetilcellulosa, pektin eller glycerin.

Lagringsforhold

Det er best å lagre dine produktene på en kjølig, tørr plass med en anbefalt temperatur fra 0°C til 27°C, som det angis på produktetiketten.

Alvorlige hendelser

Om en alvorlig hendelse skulle oppstå som følge av at du bruker produktet, vennligst rapporter dette umiddelbart til leverandøren og til rett myndighet i det landet du bor.

Holdbarhetstid

Bruk før utløpsdato som er angitt på pakken.

Forbered dine produkter

Sørg for at alle nødvendige produkter er klare til bruk. Forbered en måleguide, en saks, en penn, våte og tørre gassbind og en stomipose.

Velg en størrelse

Mål din stomi med en måleguide og klipp (hvis nødvendig) platen til stomistørrelsen. Sørg for at du velger riktig størrelse så stomien og omkringliggende hud holder seg friskt. Tillat 2 mm plass mellom din stomi og plate for en sikker og riktig passform. Om størrelsen er for stor, kommer din avføring til å skade huden. Om størrelsen er for liten, skader platen stomien. Med tiden kan din stomi forandre form eller størrelse, så periodevis kan måling kreves igjen for å forhindre lekkasje.

Forbered din hud

Støtt huden og ta bort platen forsiktig, ikke riv den av, men skyv tilbake huden fra platen, bruk et vått gassbind hvis behov. Vask huden rundt stomien med varmt og uparfymert vann. Bruk ikke noe som inneholder alkohol, parfyme, eller eter for å rengjøre huden ettersom det kan forårsake skader. Ikke gni huden for hardt da det kan føre til hudskader. Tørk huden forsiktig og nøy så din pose fester seg bra.

Valgfritt: Hvis din hud er irritert og øm kan du bruke hudbarriere krem, hydrokolloidpulver eller hudbarriereservietter. Påfør pulver, hudbarriere krem, eller tørk forsiktig på den omkringliggende huden.

Steng utløpet ved bunnen av posen

Pass først på at utløpet er stengt på en sikker måte. Steng utløpet gjennom å trykke ordentlig påappen.

Koble til din stomipose til en nattpose

Posen har en universalkran. Denne kranen kan kobles til nesten alle typer og merker av nattposer. Åpne kranen på posen og koble den til nattposen og sørg for at tilkoblingen er sikker.

Montere posen din

Ta bort platens beskyttelsesfilm. Fold platen halvveis og plasser åpningen på stomiens bunn. Strekk huden på magen med en flat hånd, og trekk hele platen over magen til riktig stilling. Jobb deg rundt stomien slik at hydrokolloiden fester til huden og pass på at platen er sikret. Legg hånden over platen og sørg for at det blir en god tetting.

Tom posen din

Løft opp kranen og åpne kranen. Tøm innholdet fra posen i toalettet. Steng kranen igjen og pass på at den er ordentlig stengt.

Inspeksjonsluke

Stomiposen inneholder en inspeksjonsluke som gjør det mulig å inspisere stomien og sekresjonen fra stomien. Det er også veldig nyttig når du setter på posen for å sikre at den er riktig plassert over stomien. Løft det ikke-vevde stoffet til inspeksjonsdøren for inspeksjon.

Avfallshåndtering av posen din

Ta bort posen og kast den i søppelbøtten. Ikke spyl ned din brukte pose i toalettet, da det kan forårsake tilstopping i ditt avløpssystem.

Hyppighet for bytting av pose

Bytt/tøm posen i henhold til råd fra helsepersonellet.

Przewidziane zastosowanie, opis produktu i informacje o materiałach

Worki stomijne służą do zbierania produktów przemiany materii z organizmu i są zwykle mocowane do skóry nad chirurgicznie wylonioną stomią.

Produkty stomijne ZenSiv to gama 1-częściowych i 2-częściowych worków stomijnych oraz 2-częściowych kołnierzy w różnych rozmiarach i kształtach. Wszystkie 1-częściowe worki i 2-częściowe kołnierze posiadają przyjazną dla skóry hydrokoloidową płytkę przylegającą do ciała, która przed użyciem jest zabezpieczona folią antyadhezyjną, na której zaznaczono otwór do wycięcia. Worek na produkt jest wykonany z folii antyzapachowej z komfortową warstwą włókniny i filtrem węglowym do neutralizacji zapachu (w przypadku ileostomii i kolostomii). Worki do ileostomii posiadają zwijane ujście do drenażu zabezpieczone zintegrowanym zamknięciem na rzep, a w każdym opakowaniu znajdują się również zaciski i miękkie opaski. Worki do urostomii posiadają miękki polimerowy kranik ułatwiający drenaż. Wszystkie worki posiadają okienko umożliwiające kontrolę stomii w razie potrzeby. Niektóre gamy produktów posiadają otwór wentylacyjny z pokrywą do odpowietrzania worka w razie potrzeby.

Wszystkie produkty stomijne ZenSiv są pozbawione lateksu oraz składników pochodzenia zwierzęcego. Produkty te są niesterylne i mogą być stosowane we wszystkich odpowiednich okolicznościach, w których lekarz prowadzący lub pracownik ochrony zdrowia zdecyduje, że można zastosować produkt niesterylny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Każdy worek jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie używać ponownie. Ponowne użycie może prowadzić do zanieczyszczenia krzyżowego.
- Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami pracownika ochrony zdrowia.
- Przed użyciem przeczytać instrukcję.
- Jeśli podczas używania worków wystąpią jakiegokolwiek reakcje alergiczne lub problemy, należy przerwać korzystanie z nich i skontaktować się z pracownikiem ochrony zdrowia.

Przeciwwskazania

Urządzenia te nie powinny być używane przez osoby o wrażliwości na: polietylen, poliamid, węgiel medyczny, polimer syntetyczny, octan etylenowo-winylowy, polipropylen, poliestr, poliizobutylen, karboksymetylocelulozę, pektynę lub glicerynę.

Warunki przechowywania

Produkty najlepiej przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od 0°C do 27°C, zgodnie z informacją na etykiecie produktu.

Poważne wypadki

Jeżeli w wyniku użytkowania produktu dojdzie do poważnego wypadku, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu producentowi i właściwym władzom w kraju zamieszkania.

Okres trwałości

Użyć przed upływem daty ważności podanej na etykiecie.

Przygotowanie wszystkich przedmiotów

Upewnić się, że wszystkie niezbędne przedmioty są gotowe do użycia. Przygotować miarkę stomijną, nożyczki, długopis, mokrą i suchą gazę oraz worek stomijny.

Wybór właściwego rozmiaru

Zmierzyć stomię za pomocą miarki i przyciąć (jeśli to konieczne) kołnierz do odpowiedniego rozmiaru stomii. Upewnić się, że wybrano właściwy rozmiar, aby stomia i otaczająca ją skóra pozostały zdrowe. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe dopasowanie, należy pozostawić maksymalnie 2 mm wolnej przestrzeni między stomią a kołnierzem. Jeśli rozmiar jest zbyt duży, kał może uszkodzić skórę. Jeśli rozmiar jest zbyt mały, kołnierz może uszkodzić stomię. Z czasem stomia może zmienić swój kształt lub rozmiar, dlatego okresowo mogą być wymagane ponowne pomiary, aby zapobiec przeciekaniu.

Przygotowanie skóry

Przytrzymać skórę i ostrożnie zdjąć kołnierz. Nie odrywać, lecz odsunąć skórę od kołnierza. W razie potrzeby użyć mokrej gazy. Umyć skórę wokół stomii ciepłą, czystą wodą. Nie używać do mycia skóry produktów zawierających alkohol, perfumy lub eter, aby nie uszkodzić skóry. Nie pocierać skóry zbyt mocno, gdyż może dojść do jej uszkodzenia. Osuszyć skórę starannie i dokładnie, aby upewnić się, że worek dobrze przylega. Opcjonalnie: Jeśli skóra jest podrażniona i obolała, można użyć kremu ochronnego, pudru hydrokoloidowego lub gazików ochronnych. Zastosować puder, krem ochronny lub gazik delikatnie na otaczającą skórę.

Zamknięcie kraniku u podstawy worka

Najpierw należy upewnić się, że kranik jest bezpiecznie zamknięty. Zamknąć kranik, mocno go naciskając.

Podłączenie worka stomijnego do worka na noc

Worek posiada uniwersalny kranik. Kranik ten można podłączyć do prawie każdego typu i marki worka na noc. Otworzyć kranik worka, podłączyć go do łącznika worka na noc i upewnić się, że połączenie jest bezpieczne.

Dopasowywanie worka

Zdjąć papier zabezpieczający kołnierz. Złożyć kołnierz na pół i umieścić otwór w dolnej części stomii. Rozciągnąć skórę brzucha płaską dłońią i przeciągnąć cały kołnierz nad stomią do właściwej pozycji. Obejść stomię dookoła tak, aby hydrokoloid przylegał do skóry, i upewnić się, że kołnierz jest dobrze przymocowany. Umieścić dłoń na kołnierzu i upewnić się, że powstało dobre uszczelnienie.

Opróżnianie worka

Podnieść kranik i otworzyć go. Opróżnić zawartość worka do toalety. Ponownie zamknąć kranik, upewniając się, że jest szczelnie zamknięty.

Okienko

Worek stomijny posiada okienko, które umożliwia kontrolę stomii oraz jej ujścia. Jest również bardzo pomocne podczas zakładania worka, aby upewnić się, że jest on prawidłowo umieszczony nad stomią. W celu kontroli należy podnieść warstwę włókniny okienka.

Utylizacja worka

Wyjąć worek i wyrzucić go do kosza. Nie splukiwać zużytego worka w toalecie, ponieważ spowoduje to zablokowanie kanalizacji.

Częstotliwość wymiany worka

Wymieniać/opróżniać worek zgodnie z zaleceniami pracownika ochrony zdrowia.

PT - Instruções de uso

Uso pretendido, descrição do produto e informações de materiais

Bolsas para ostomia são usadas para coletar resíduos do corpo e geralmente são fixadas à pele sobre um estoma realizado cirurgicamente.

A gama de produtos Zensiv Ostomy contém bolsas para ostomia de 1 e 2 peças e flanges de 2 peças em vários tamanhos e formas. Todas as bolsas de 1 peça e flanges de 2 peças apresentam um wafer hidrocolóide que não agride a pele, para adesão ao corpo, e, antes do uso, é protegido com uma película de liberação que mostra uma guia de corte. O produto «bolsa» é fabricado em filme de barreira contra odores com uma camada de não-tecido confortável e um filtro de carbono para controle de odores (para ileostomia e colostomia). As bolsas para ileostomia têm uma abertura de drenagem de enrolar, protegida com um fecho do tipo 'velcro' integrado ou existem braçadeiras e laços flexíveis fornecidos em cada caixa. Para urostomia, as bolsas possuem uma torneira de polímero macio para fácil drenagem. Todas as bolsas têm uma janela de visualização para inspecionar o estoma, se necessário. Alguns produtos da linha apresentam um respiradouro com tampa para ventilar a bolsa, se necessário.

Todos os produtos ZenSiv Ostomy não contêm látex e não contêm ingredientes de origem animal. Os produtos não são estéreis e podem ser usados em quaisquer circunstâncias apropriadas em que o médico assistente ou profissional de saúde decida que um produto não estéril possa ser aplicado.

Avisos - Precauções

- Cada bolsa é para uso único. Não reutilize. A reutilização pode levar a uma contaminação cruzada.
- Use somente conforme indicado pelo seu profissional de saúde.
- Leia as instruções antes de usar.
- Interrompa o uso e entre em contato com o seu profissional de saúde se tiver reações alérgicas ou problemas ao usar as bolsas.

Contraindicações

Esses dispositivos não devem ser usados por ninguém com sensibilidade conhecida a: polietileno, poliamida, carvão medicinal, polímero sintético, etileno acetato de vinila, polipropileno, poliéster, poliisobutileno, carboximetilcelulose, pectina ou glicerina.

Condições de armazenamento

É melhor armazenar seus produtos em um local fresco e seco com uma temperatura de 0°C a 27°C conforme indicado no rótulo do produto.

Incidentes Graves

Caso ocorra um incidente grave como resultado do uso do produto, informe imediatamente o fabricante e a autoridade competente do país onde você reside.

Validade

Use dentro do prazo de validade indicada no rótulo.

Colete seus materiais

Certifique-se de que todos os materiais necessários estão prontos para uso. Pegue um guia de medição, uma tesoura, uma caneta, uma gaze húmida e seca e uma bolsa para estoma.

Escolha o tamanho certo

Meça o seu estoma com uma guia de medição e corte (se necessário) o flange no tamanho certo do estoma. Certifique-se de escolher o tamanho certo para que o estoma e a pele ao redor permaneçam saudáveis. Deixe no máximo 2 mm de espaço entre o estoma e o flange para um adapte correto e seguro. Se o tamanho for muito grande, suas fezes danificarão a pele. Se o tamanho for muito pequeno, o flange danificará o estoma. Com o tempo, seu estoma pode mudar de forma ou tamanho, portanto, medições periódicas podem ser necessárias novamente para evitar qualquer vazamento.

Prepare sua pele

Apoie a pele e remova o flange com cuidado, não arranque, mas empurre a pele para trás do flange, use uma gaze húmida, se necessário. Lave a pele ao redor do estoma com água morna e não perfumada. Não use nada que contenha álcool, perfume ou éter para limpar sua pele, pois pode causar danos. Não esfregue a pele com muita força, pois isso pode causar danos à pele. Seque a pele cuidadosa e completamente para garantir que sua bolsa adira bem.

Opcional: Se sua pele estiver irritada e dolorida, você pode usar um creme de proteção para a pele, pó de hidrocolóide ou lenços de proteção para a pele. Aplique o pó, creme de proteção para a pele ou limpe suavemente na pele circundante.

Feche a torneira na base da bolsa

Primeiro certifique-se de que a torneira está fechada com segurança. Feche a torneira pressionando-a com firmeza.

Conectando sua bolsa a uma bolsa noturna

A bolsa possui uma torneira universal. Esta torneira pode ser conectada a quase qualquer tipo e marca de bolsa noturna. Abra a torneira da bolsa e conecte-a ao conector da bolsa noturna e verifique se a conexão está firme.

Adapte a sua bolsa

Remova o papel de liberação do flange. Dobre o flange até a metade e coloque a abertura na parte inferior do estoma. Estique a pele do abdômen com a mão espalmada e puxe todo o flange sobre o estoma para a posição correta. Busque o seu caminho ao redor do estoma para que o hidrocolóide se fixe na pele e certifique-se de que o flange esteja seguro. Coloque sua mão sobre o flange e certifique-se de que haja um boa vedação.

Esvazie sua bolsa

Levante a torneira e abra a torneira. Esvazie o conteúdo de sua bolsa no WC. Feche a torneira novamente, certificando-se de que está bem fechada.

Janela de visualização

A bolsa de ostomia inclui uma janela de visualização que permite inspecionar tanto o estoma quanto o que sai do mesmo. Também é muito útil ao aplicar a bolsa para verificar se ela está localizada corretamente sobre o estoma. Levante o não-tecido da janela de visualização para inspeção.

Descarte de sua bolsa

Remova sua bolsa e descarte-a no lixo. Não jogue a bolsa usada no vaso sanitário, pois isso bloqueará o sistema de esgoto.

Frequência de troca de bolsa

Troque/esvazie a bolsa conforme recomendado pelo seu profissional de saúde.

Utilizare, descriere produs și informații despre materiale

Pungile de ostomie sunt folosite pentru colectarea deșeurilor din corp și sunt de obicei atașate de piele peste stoma produsă chirurgical.

Produsele Zensiv Ostomy se regăsesc într-o gamă de punți unitare cât și din 2 bucăți (flansa și puntea colectoare), în diferite dimensiuni și forme. Toate punțile dintr-o bucată cât și cele din 2 bucăți au o placă hidrocolidă prietenoasă pentru piele pentru aderența la corp iar aceasta este protejată înainte de utilizare cu un film care prezintă un ghid de tăiere. Puntea colectoare este acoperită cu un strat neșut confort și un filtru de carbon pentru controlul mirosului (pentru ileostomie și colostomie). Pungile pentru ileostomie au fie o închidere tip „velcro” (arici), fie sunt furnizate cleme și legături moi în fiecare cutie. Pentru urostomie, punțile prezintă un robinet de evacuare, din polimer moale pentru o scurgere ușoară. Toate pungile au fereastră de vizualizare pentru a inspecta stoma, dacă este nevoie. În cazul în care este necesar, unele game sunt prevăzute cu un capac pentru ventilarea punții.

Toate produsele ZenSiv Ostomy nu conțin latex și nu conțin ingrediente de origine animală. Produsele nu sunt sterile și pot fi utilizate în circumstanțe adecvate, la recomandarea unui medic curant sau a profesionistului din domeniul sănătății.

Avertismente-Măsură de precauție

- Fiecare punte este de unică utilizare. Nu reutilizați. Reutilizarea poate duce la contaminare încrucișată.
- Utilizați conform indicațiilor date de către specialistul dumneavoastră în sănătate.
- Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.
- Întrerupeți utilizarea și luați legătura cu specialistul în sănătate dacă aveți reacții alergice sau probleme atunci când utilizați punțile.

Contraindicații

Aceste dispozitive nu trebuie utilizate de către persoanele care au o alergie cunoscută la: polietilenă, poliamidă, cărbune medical, polimer sintetic, acetat de etilen vinil, polipropilenă, poliester, polisobutilenă, carboximetilceluloză, pectină sau glicerină.

Condiții de depozitare

Cel mai bine este să stocați produsele într-un loc uscat, cu o temperatură variabilă între 0°C și 27°C, așa cum se menționează pe eticheta produsului.

Incidente grave

Dacă apare un incident grav ca urmare a utilizării produsului, raportați-l imediat producătorului și autorității competente din țara în care vă aflați.

Termen de valabilitate

Utilizarea până la data de expirare menționată pe etichetă.

Colectarea materialelor

Asigurați-vă că toate materialele necesare sunt gata de utilizare. Folosiți șablonul, o pereche de foarfece, un stilou, tifon umed și uscat și o puntea de stoma.

Alegeți dimensiunea potrivită

Măsurați-vă colostoma folosind șablonul și tăiați (dacă este necesar) flanșa la dimensiunea corectă a stomei. Asigurați-vă că alegeți dimensiunea potrivită când decupați și pielea din jurul stomei o să rămână sănătoasă. Permiteți maximum 2 mm spațiu între stoma și flanșa pentru o potrivire sigură și corectă. Dacă dimensiunea este prea mare, materiile fecale vor deteriora pielea. Dacă dimensiunea este prea mică, flanșa va deteriora stoma. De-a lungul timpului, stoma dvs. își poate schimba forma sau dimensiunea, astfel încât periodic pot fi necesare din nou măsurători pentru a preveni orice scurgere.

Pregătiți-vă pielea

Sustineți pielea și îndepărtați flanșa cu atenție, fără miscări bruște, ci împingeți pielea înapoi de pe flanșă, folosiți un tifon umed dacă este necesar. Curățați pielea din jurul stomei cu apă caldă. Nu folosiți produse care conțin alcool sau parfum pentru a vă curăța pielea, deoarece pot provoca iritații. Nu frecăți pielea prea tare, deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea pielii. Uscați foarte bine pielea pentru a vă asigura că puntea dvs. aderă bine.

Opțional: dacă pielea este iritată și dureroasă, puteți folosi cremă de protecție pentru piele sau praf hidrocolid. Aplicați pudra, crema de protecție pentru piele ștergeți ușor pielea din jur.

Închideți valva de la baza punții

Mai întâi asigurați-vă că valva este foarte bine închisă, apăsându-o ferm.

Conectarea punții la un sac colector de urină

Punga are un valva universală. Acesta valva poate fi conectată la aproape orice tip și marcă de sac de noapte. Deschideți valva punții și conectați-o la conectorul sacului de noapte și asigurați-vă că sunt bine conectate.

Potrivii-vă puntea

Scoateți hârtia protecoate de pe flanșă. Îndoii flanșa pe jumătate și așezați deschizătura în partea inferioară a stomei. Întindeți pielea abdomenului cu mâna și trageți întreaga flanșă peste stoma, în poziția corectă, astfel încât hidrocoloidul să se atașeze de piele. Așezați mâna peste flanșă și asigurați-vă că se crează o etanșare bună.

Golirea punții

Ridicați partea inferioară a punții și deschideți valva. Goliți conținutul punții în toaletă. Închideți valva din nou și asigurați-vă că este bine închisă.

Fereastra de vizualizare

Punga de colostomie/ileostomie include o fereastră de vizualizare care face posibilă inspecția stomei. De asemenea, este foarte utilă atunci când aplicați puntea pentru a vă asigura că este localizată corect peste stomă.

Aruncarea punții

Îndepărtați puntea și aruncați-o în coșul de gunoi. Nu aruncați puntea folosită în toaletă, deoarece acest lucru vă va bloca sistemul de canalizare.

Frecvența de schimbare a punții

Schimbați/goliți puntea conform indicațiilor specialistului în sănătate.

SE - Bruksanvisning

Avsedd användning, produktbeskrivning och materialinformation

Stomipåsar används för att samla upp avfall från kroppen och är vanligtvis fästa vid huden över en kirurgiskt framställd stomi.

Zensiv stomiprodukter är en serie stomipåsar med 1-dels och 2-dels och plattor i olika sorter/varianter, storlekar och former. Alla 1-dels påsar och 2-dels plattor har en hudvänlig hydrokolloidplatta för vidhäftning till kroppen och detta skyddas före användning med en uppklipningsbar skyddsfilm. Stomipåsen är tillverkad av luftbarriärfilm med ett bekvämt non-woven lager och ett kolfilter för luktkontroll (för ileostomi och kolostomi). Ileostomipåsar har antingen ett upprullningsbart lås som är säkrat med ett integrerat "kardborrband" eller så finns klämmor och mjuka band i varje låda. För urostomi har påsarna en mjuk polymerkran för enkel dränering. Alla påsar har ett visningsfönster för inspektion av stomin vid behov. Vissa påsar har en luftningslucka för att ventilerat påsen vid behov.

Alla ZenSiv stomiprodukter är latexfria och innehåller inte ingredienser av animaliskt ursprung. Produkterna är icke-sterila och kan användas under alla lämpliga omständigheter där den behandlande läkaren eller vårdpersonalen beslutar att en icke-steril produkt kan användas.

Varningar-försiktighetsåtgärder

- Varje påse är endast avsedd för engångsbruk. Återanvänd inte. Återanvändning kan leda till korskontaminering.
- Använd endast enligt anvisningar från din sjukvårdspersonal.
- Läs instruktionerna före användning.
- Avbryt användningen och kontakta din sjukvårdspersonal om du upplever allergiska reaktioner eller problem när du använder påsarna.

Kontraindikationer

Dessa enheter bör inte användas av någon med känd känslighet för: polyeten, polyamid, medicinsk kol, syntetisk polymer, etenvinylacetat, polypropylen, polyester, polyisobutylene, karboximetilcellulosa, pektin eller glycerol.

Förvaringsförhållanden

Det är bäst att förvara dina produkter på en sval, torr plats med en rekommenderad temperatur från 0°C till 27°C, som anges på produktetiketten.

Allvarliga incidenter

Om en allvarlig händelse skulle uppstå till följd av att du använder produkten, vänligen rapportera detta omedelbart till leverantören och den behöriga myndigheten i det land där du bor.

Hållbarhetstid

Använd före utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Förbered dina produkter

Se till att alla nödvändiga produkter är färdiga för användning. Förbered en mätguide, en sax, en penna, våta och torra gasbindor och en stomipåse.

Välj rätt storlek

Mät din stomi med en mätguide och klipp (om nödvändigt) plattan till stomistorleken. Se till att du väljer rätt storlek så att stomin och omgivande hud förblir friska. Tillåt 2 mm utrymme mellan din stomi och platta för en säker och korrekt passform. Om storleken är för stor, kommer din avföring att skada huden. Om storleken är för liten skadar plattan stomin. Med tiden kan din stomi ändra form eller storlek, så periodvis kan mätningar krävas igen för att förhindra läckage.

Förbered din hud

Stöd huden och ta bort plattan försiktigt, riv inte av den utan skjut tillbaka huden från plattan, använd vid behov en våt gasbinda. Tvätta huden som omger stomin med varmt och oparfymrat vatten. Använd inte något som innehåller alkohol, parfym eller eter för att rengöra huden eftersom det kan orsaka skador. Gnid inte huden för hårt eftersom det kan leda till hudskador. Torka huden försiktigt och noggrant så att din påse fäster bra. Valfritt: Om din hud är irriterad och öm kan du använda hudbarriärkräm, hydrokolloidpulver eller hudbarriärservetter. Applicera pulver, hudbarriärkräm eller torka försiktigt på den omgivande huden.

Stäng utloppet vid botten av påsen

Se först till att utloppet är stängd på ett säkert sätt. Stäng utloppet genom att trycka ordentligt på tappen.

Anslut din stomipåse till en nattpåse

Påsen har en universalkran. Denna kran kan anslutas till nästan alla typer och märken av nattpåsar. Öppna kranen på påsen och anslut den till nattpåsen och se till att anslutningen är säker.

Montera din påse

Ta bort plattans skyddsfilm. Vik plattan halvvägs och placera öppningen på stomins undersida. Sträck huden på buken med en platt hand och dra hela plattan över magen till rätt läge. Arbeta dig runt stomin så att hydrokolloiden fäster vid huden och se till att plattan är säkrad. Lägg handen över plattan och se till att en god tätning skapas.

Töm din påse

Lyft upp kranen och öppna kranen. Töm innehållet från din påse i toaletten. Stäng kranen igen och se till att den är ordentligt stängd.

Inspektionslucka

Stomipåsen innehåller en inspektionslucka som gör det möjligt att inspektera stomin och utsöndring från stomin. Det är också till stor hjälp när du applicerar påsen för att se till att den är korrekt placerad över stomin. Lyft upp non-woven tyget till inspektionsluckan för inspektion.

Avfallshantering av din påse

Ta bort påsen och kassera den i papperskorgen. Spola inte ner din använda påse i toaletten, eftersom det kan orsaka stopp i ditt avloppssystem.

Frekvens för byte av påse

Byt/töm påsen enligt råd från din sjukvårdspersonal.

SI - Navodila za uporabo

Predvidena uporaba, opis izdelka in bistvene informacije

Vrečke za stomo omogočajo zbiranje izločkov iz telesa. Običajno se pritrdijo na kožo čez kirurško oblikovano stomo.

Vrečke za stomo Zensiv so linija enodelnih in dvodelnih zbiralnih vrečk za stomo in dvodelnih prirobnic različnih velikosti in oblik. Vse enodelne vrečke in dvodelne prirobnice imajo koži prijazno hidrokoloidno podlogo, ki se prilepi na telo, in so pred uporabo zaščitene z zaščitno folijo, na kateri je označen vzorec za izrez. Vrečke so izdelane iz materiala, ki preprečuje širjenje neprijetnih vonjav, z netkanim slojem, ki zagotavlja udobje, in ogljikovim filtrom za obvladovanje neprijetnih vonjav (pri ileostomi in kolostomi). Vrečke za ileostomo imajo odtočno odprtino, ki se zvije in zavaruje z velcro trakom, ali pa je izdelek opremljen s sponkami ali podobnimi pritrdilnimi pripomočki. Vrečke za urostomo imajo odtočno odprtino iz mehkih polimerov, ki omogoča enostavno izpraznjevanje seča. Vse vrečke so opremljene s pregledovalnim okencem, ki omogoča preverjanje stome, če je to potrebno. Nekateri izdelki imajo tudi ventil s pokrovom, ki omogoča zračenje stome, če je to potrebno.

Vsi izdelki za oskrbo stome ZenSiv so brez lateksa in ne vsebujejo sestavin živalskega izvora. Izdelki so nesterilni in se lahko uporabljajo v vseh ustreznih okoliščinah, ko zdravnik ali medicinski strokovnjak odloči, da je uporaba nesterilnih izdelkov primerna.

Opozorila/Previdnostni ukrepi

- Vsaka vrečka je namenjena le za enkratno uporabo. Vrečk ne uporabljaj te ponovno. Ponovna uporaba lahko vodi do navzkrižne kontaminacije.
- Izdelek uporabljajte v skladu z navodili zdravnika.
- Pred uporabo preberite navodila.
- Če imate zaradi uporabe vrečk alergij sko reakcijo ali druge težave, vrečko prenehajte uporabljati in se obrnite na svojega zdravnika.

Kontraindikacije

Teh pripomočkov ne smejo uporabljati ljudje, ki so občutljivi na: polietilen, poliamid, medicinsko oglje, sintetične polimere, etilen vinil acetat, polipropilen, poliester, poliizobutilen, karboksimetilcelulozo, pektin ali glicerol.

Pogoji shranjevanja

Izdelke hranite na hladnem suhem mestu pri temperaturi med 0°C in 27°C, kot zapisano na oznaki izdelka.

Resni zapleti

V primeru, da pride zaradi uporabe tega izdelka do resnih zapletov, to nemudoma javite proizvajalcu in pristojnemu organu države, v kateri prebivate.

Rok trajanja

Rok trajanja je naveden na izdelku.

Pripravite vse potrebne pripomočke

Prepričajte se, da so vsi potrebni pripomočki pripravljeni za uporabo. Potrebujete merilni pripomoček, škarje, pisalo, mokro in suho gazo in vrečko za stomo.

Izberite pravo velikost

Z merilnim pripomočkom izmerite svojo stomo in (po potrebi) odrežite prirobnico, da bo njena velikost ustrezala velikosti vaše stome. Izberite pravo velikost, da bo vaša stoma in koža okoli nje ostala zdrava. Poskrbite za 2 mm razmika med vašo stomo in prirobnico, da zagotovite varno in pravilno namestitve. Če je prirobnica prevelika, bo blato poškodovalo vašo kožo. Če je prirobnica premajhna, bo poškodovala stomo. S časom se lahko oblika ali velikost vaše stome spreminja, tako da morate stomo redno meriti, da preprečite neželeno iztekanje.

Pripravite svojo kožo

Podprite kožo in previdno odstranite prirobnico, ne odtrgajte je, temveč počasi potiskajte kožo stran od prirobnice, po potrebi uporabite mokro gazo. Kožo okoli stome umijte s toplo in čisto vodo. Za čiščenje kože ne uporabljajte ničesar, kar vsebuje alkohol, parum ali eter, saj lahko s tem poškodujete stomo. Kože ne drgnite premočno, saj lahko to vodi do poškodb kože. Previdno in temeljito posušite kožo, da se bo vrečka dobro prilepila.

Poljubno: Če je vaša koža razdražena in boleča, lahko uporabite kremo za zaščito kože, hidrokoloidni gel ali vlažilne robčke. Previdno nanesite kremo ali gel na razdraženo kožo.

Zaprte odvodni čep na dnu vrečke

Prepričajte se, da je čep dobro zaprt. Čep zaprete tako, da ga tesno stisnete.

Povežite vašo vrečko za stomo z nočno zbiralno vrečko

Vrečka ima univerzalen čep. Ta čep lahko povežete s skoraj vsemi vrstami nočnih zbiralnih vrečk raznih proizvajalcev. Odprite čep vrečke in ga povežite s priključkom nočne zbiralne vrečke ter se prepričajte, da stik ne pušča.

Namestite vrečko

Odstranite zaščitni papir prirobnice. Prirobnico prepognite na pol in odprtino namestite na spodnjo stran stome. Raztegnite kožo na vašem trebuhu in celo prirobnico ustrezno namestite čez stomo. Prirobnico počasi nameščajte okoli stome, tako da se hidrokoloid prime na kožo. Prepričajte se, da se prirobnica tesno prilega. Položite roko nad prirobnico in se prepričajte, da dobro tesni.

Izpraznite vrečko

Dvignite čep in ga odprite. Vsebino vrečke izpraznite v straniščno školjko. Ponovno zaprite čep in preverite, da dobro tesni.

Pregledovalno okence

Vrečke za stomo so opremljene s pregledovalnim okencem, s pomočjo katerega lahko preverite stomo in izločke, ki prihajajo iz nje. Okence pomaga tudi pri tem, da vrečko pravilno namestimo čez stomo. Za ogled stome dvignite netkano površino pregledovalnega okenca.

Odstranjevanje vrečk

Snemite vrečko in jo ustrezno odstranite v smeti. Uporabljene vrečke ne mečite v stranišče, saj boste tako zamašili kanalizacijski sistem.

Kako pogosto menjati vrečke

Vrečke praznite/menjajte v skladu z navodili vašega zdravnika.

SK - Inštrukcie na používanie

Určené použitie, popis produktu a informácie o materiáli

Stomické vrecká sa používajú na zachytávanie obsahu čreva a zvyčajne sa priložia na pokožku cez chirurgicky vytvorenú stómiu.

Produkty ZenSiv Ostomy sú radom jednodielnych a dvojdielnych stomických vreciek a dvojdielnych podložiek v rôznych veľkostiach a tvaroch. Všetky jednodielne vrecká a dvojdielne podložky obsahujú hydrokoloidnú vrstvu šetrnú k pokožke na príľnutie k telu, ktorá je pred použitím chránená ochrannou fóliou s ystrihovacou šablónou. Vrecko je vyrobené z ochranného filmu proti zápachu s príjemnou netkanou vrstvou a uhlíkovým filtrom na kontrolu zápachu (na ileostómiu a kolostómiu). Ileostomické vrecká majú buď rolovací výpusť zabezpečený zavedeným uzáverom zo suchého zipsu alebo sa v každom balení dodávajú svorky a mäkké pásiky. Urostomické vrecká majú výpusť z mäkkého polyméru na jednoduché vypúšťanie. Všetky vrecká majú prehľadnú časť na kontrolovanie stómie v prípade potreby. Niektoré rady produktov obsahujú ventil s krytom na vetranie vrecka, ak je to potrebné.

Produkty ZenSiv Ostomy neobsahujú latex ani zložky živočíšneho pôvodu. Produkty sú nesterilné a môžu sa použiť za akýchkoľvek vhodných okolností, keď ošetrojúci lekár alebo zdravotnícky pracovník rozhodne, že sa môže použiť nesterilný produkt.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Každé vrecko je určené len na jednorazové použitie. Nepoužívajte ho opakovane. Opakované použitie môže viesť ku krížovej kontaminácii.
- Používajte len podľa pokynov vášho zdravotníckeho pracovníka.
- Pred použitím si prečítajte návod.
- Ak sa pri používaní vreciek vyskytnú alergické reakcie alebo problémy, prestaňte vrecká používať a kontaktujte svojho lekára.

Kontraindikácie

Tieto pomôcky by nemali používať osoby so znášanlivosťou na: polyetylén, polyamid, lekárske uhlie, syntetický polymér, etylénvinylacetát, polypropylén, polyester, polyizobutylén, karboxymetylcelulóza, pektín alebo glycerín.

Podmienky skladovania

Produkt je najlepšie skladovať na chladnom suchom mieste s regulovaním teploty od 0°C do 27°C, ako je uvedené na obale produktu.

Závažné nežiaduce udalosti

Ak v dôsledku používania nastane závažná nežiaduca udalosť, ihneď to ohláste výrobcovi a príslušnému orgánu v krajine vášho bydliska.

Doba použiteľnosti

Používajte do dátumu expirácie uvedeného na obale.

Pripravte si pomôcky

Uistite sa, že máte pripravené všetky potrebné pomôcky. Pripravte si meraciu šablónu, nožnice, pero, vlhkú a suchú gázu a stomické vrecko.

Vyberte si správnu veľkosť

Zmerajte si stómiu pomocou šablóny a (v prípade potreby) vystrihnite podložku na správnu veľkosť stómie. Uistite sa, že ste zvolili správnu veľkosť, aby zostala stómia aj okolitá pokožka zdravá. Medzi stómiou a podložkou nechajte najviac 2 mm na bezpečné a správne používanie. Ak bude podložka príliš veľká, výkaly poškodia pokožku. Ak bude podložka príliš malá, poškodí podložka stómiu. Stómia môže v priebehu času meniť veľkosť a tvar, preto môžu byť potrebné pravidelné merania, aby sa zabránilo úniku.

Pripravte pokožku

Pridržte pokožku a opatrne odstráňte podložku, nestrhnite ju, ale ťahajte pokožku od podložky, v prípade potreby použite vlhkú gázu. Pokožku okolo stómie umyte teplou vodou bez parfumov. Na umývanie pokožky nepoužívajte žiadne prípravky s obsahom alkoholu, parfumu alebo éteru, pretože môžu pokožku podráždiť. Nešúchajte pokožku príliš silno, aby ste ju nepoškodili. Opatrne a dôkladne osušte pokožku, aby vrecko dobre priľnulo k pokožke.

Voliteľné: Ak máte podráždenú alebo bolestivú pokožku, môžete použiť bariérový krém, hydrokoloidný prášok alebo ochranné rúško. Jemne aplikujte prášok, bariérový krém alebo ochranné rúško na okolitú pokožku.

Uzatvorte výpusť na vrecku

Najskôr sa uistite, že výpusť je bezpečne uzatvorený. Výpusť zatvorte silným stlačením výpustu.

Pripojenie vrecka k nočnému zbernému vrecku

Vrecko má univerzálny výpusť. Tento výpusť je možné pripojiť takmer ku všetkým typom a značkám nočného zberného vrecka. Otvorte výpusť na vrecku, pripojte ho k otvoru na nočnom vrecku a uistite sa, že spoj je zabezpečený.

Pripevnite vrecko

Odstráňte ochrannú fóliu z podložky. Preložte podložku na polovicu a priložte otvor k spodnej časti stómie. Dlaňou natiahnite pokožku na bruchu a priložte celú podložku na stómiu do správnej polohy. Pritláčajte okolie stómie, aby hydrokoloid priľnul k pokožke, a uistite sa, že podložka je zabezpečená. Položte na podložku ruku a uistite sa, že sa vytvorilo dobré spojenie.

Vyprázdňte vrecko

Zdvihnite výpusť a otvorte uzáver. Vyprázdňte obsah vrecka do toalety. Znova uzatvorte výpusť a uistite sa, že je bezpečne uzatvorený.

Priehľadný otvor

Stomické vrecko obsahuje prehľadné okienko, vďaka ktorému je možné kontrolovať stómiu, ako aj výtok zo stómie. Tento otvor je tiež veľmi nápomocný pri nasádzaní vrecka, aby bolo umiestnené správne na stómiu. Zdvihnite netkanú časť prehľadného otvoru a skontrolujte stómiu.

Likvidácia vrecka

Odstráňte vrecko a zahodte ho do koša. Nesplachujte vrecko do toalety, pretože upcháva vašu kanalizáciu.

Frekvencia vymieňania vrecka

Vymieňajte/vyprázdňujte vrecko podľa pokynov zdravotníckeho pracovníka.

Показання, опис продукту, інформація про склад

Калоприймачі стомічні призначені для збору кишкових виділень, що виділяються з тіла людини. Калоприймач зазвичай кріпиться навколо стоми, яка сформована хірургічним шляхом.

Калоприймачі Zensiv (Зенсів) можуть бути однокомпонентні та двокомпонентні. Пластини двокомпонентних калоприймачів можуть бути різних розмірів та форм. Всі пластини одно- та двокомпонентних калоприймачів вирізняються наявністю сприятливого для шкіри гідроколідного адгезиву, що забезпечує приклеювання. Адгезив пластини покритий захисною плівкою, на якій нанесені направляючі лінії для вирізання отвору. Мішок калоприймача виготовлений із плівки, що не пропускає запах і комфортного нетканого покриття та має вбудований карбоновий фільтр для контролю запаху. Ілеостомні калоприймачі можуть закриватись на вбудовану застібку на липучках (велкро), на жорсткий затискач (кліпсу) або на гнучкий затискач, якими комплектується кожна коробка (упаковка). Уростомний мішок обладнаний м'яким полімерним краном для легкого випорожнення. Всі мішки калоприймачів обладнані вікном для інспекції при необхідності. Деякі калоприймачі мають вентиляційний отвір для вентиляції за потреби.

Вся стомічна продукція ZenSiv (Зенсів) не містить латексу та складових тваринного походження. Продукція є нестерильною і може бути застосована при відповідних обставинах за рішенням терапевта або іншого лікаря про можливість використовувати нестерильну продукцію.

Попередження - Застереження

- Кожний калоприймач – одноразового використання. Не використовуйте виріб повторно. Повторне використання може призвести до перехресного забруднення.
- Використовуйте у спосіб, призначений лікарем.
- Прочитайте інструкцію перед використанням.
- Не використовуйте виріб та проконсультуйтеся з лікарем у разі виникнення алергічних реакцій або інших проблем під час використання.

Протипоказання

Дані вироби не повинні застосовувати люди, у яких була виявлена чутливість до: поліетилену, поліамідів, медичного деревного вугілля, синтетичного полімеру, етиленвінілацетату, поліпропілену, поліестеру, поліізобутилену, карбоксиметилцелюлози, пектину або гліцерину

Умови зберігання

Найкращі умови для зберігання продукції – прохолодне сухе місце з температурою від 0°C до 27°C, як це зазначено на продуктивій етикетці.

Серйозні випадки

У разі серйозного випадку, пов'язаного з використанням продукції, просимо вас негайно повідомити виробника та компетентні органи вашої країни.

Термін придатності

Кінцева дата (Вжити до) терміну придатності вказана на етикетці продукту.

Приготуйте все необхідне

Переконайтесь, що всі необхідні засоби готові до використання. Приготуйте шаблон для вирізання отвору, ножиці, олівець, вологі та сухі серветки і калоприймач.

Визначте правильний розмір

Виміряйте вашу стому за допомогою шаблону та виріжте (якщо це необхідно) отвір, що відповідає розміру стоми. Переконайтесь, що ви зробили отвір, який відповідає розміру стоми, і шкіра біля стоми буде захищена. Різниця в розмірі отворів стоми та отвору пластини не більше 2 мм є відповідною та безпечною. Якщо отвір буде більшим, кишкові виділення можуть пошкодити шкіру. Якщо отвір буде меншим за розмір стоми, є вірогідність травмування стоми пластиною калоприймача. З часом ваша стома може змінити форму та розмір, періодичне вимірювання необхідне для попередження підтікання кишкових виділень під пластину калоприймача.

Підготуйте вашу шкіру

Притримуючи шкіру, відклейте обережно пластину. Відклеюйте шкіру від пластини, а не відривайте пластину від шкіри. Використовуйте вологі серветки за потреби. Очистіть шкіру навколо стоми теплою чистою водою. Не використовуйте для очищення шкіри нічого, що містить спирт, парфуми чи ефір, оскільки це може завдати шкоди шкірі. Не тріть шкіру занадто сильно, оскільки це може спричинити пошкодження шкіри. Просушіть обережно та ретельно шкіру, щоб забезпечити хорошу адгезію (приклеювання) калоприймача зі шкірою.

Додаткова інформація: якщо ваша шкіра подразнена або має ознаки запалення, ви можете використовувати захисний крем-бар'єр, гідроколідний абсорбуючий порошок (пудру) або захисні серветки. Нанесіть абсорбуючий порошок чи захисний крем-бар'єр, або легко протріть захисними серветками шкіру навколо стоми.

Закрийте дренажний кран для зливу сечі вниз уростомного мішка

Переконайтесь, що кран закритий надійно. Для надійного закривання міцно натисніть на кран.

З'єднання уростомного мішка з нічним сечоприймачем

Уростомний мішок має універсальний дренажний кран. Цей тип дренажного крану може бути поєднаний майже з усіма типами нічних сечоприймачів. Відкрийте дренажний кран і під'єднайте уростомний мішок до конектора нічного сечоприймача, переконайтесь, що уростомний мішок та нічний сечоприймач з'єднані надійно.

Підготуйте калоприймач

Видаліть захисну плівку з пластини калоприймача. Зігніть наполовину і розмістіть нижню частину навколо стоми. Розгладьте шкіру навколо стоми однією рукою зверху, приклейте верхню частину. Розгладьте ретельно пластину навколо стоми, щоб забезпечити адгезію (приклеювання) гідроколіду пластини зі шкірою навколо стоми, переконайтесь, що пластина приклеєна надійно. Покладіть обидві руки на пластину та переконайтесь, що пластина приклеєна герметично.

Випорожнення мішка

Відкрийте дренажний кран. Випорожніть вміст мішка в туалет. Закрийте дренажний кран та переконайтесь, що він закритий надійно.

Оглядове вікно

Стомічний мішок обладнаний оглядовим вікном, що дозволяє зробити інспекцію стоми та кишкових виділень. Через оглядове вікно зручно контролювати чи правильно приклеєна пластина калоприймача навколо стоми. Відігніть неткану поверхню вікна для інспекції.


Утилізація калоприймачів

Відклейте ваш калоприймач та викиньте його до смітцевого баку. Не викидайте використаний калоприймач до туалету (унітазу), бо це спричинить блокування каналізаційної системи.

Частота заміни калоприймача

Змінійте/випорожняйте мішок відповідно до рекомендації вашого лікаря.

1-PIECE UROSTOMY

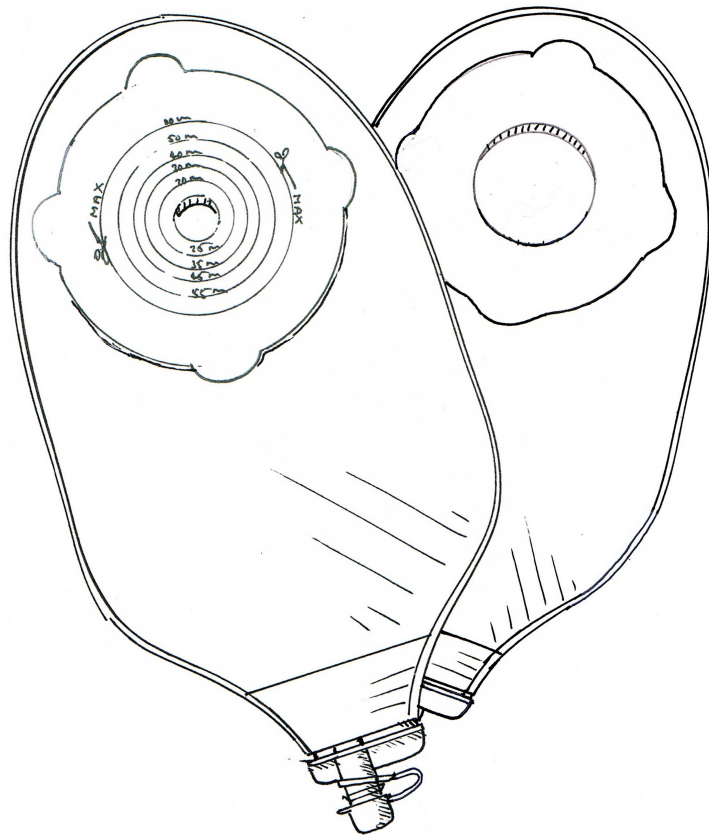

Oxmed International GmbH
Groendahlscher Weg 87
46446Emmerich am Rhein
Germany